

# スロープ

## スロープの走行における注意点


降りる時は、介助者が後ろ向きになり、支えるように降りましょう。

体位  
変換器

認知症  
老人徘徊  
感知機器

手すり


歩行  
補助杖

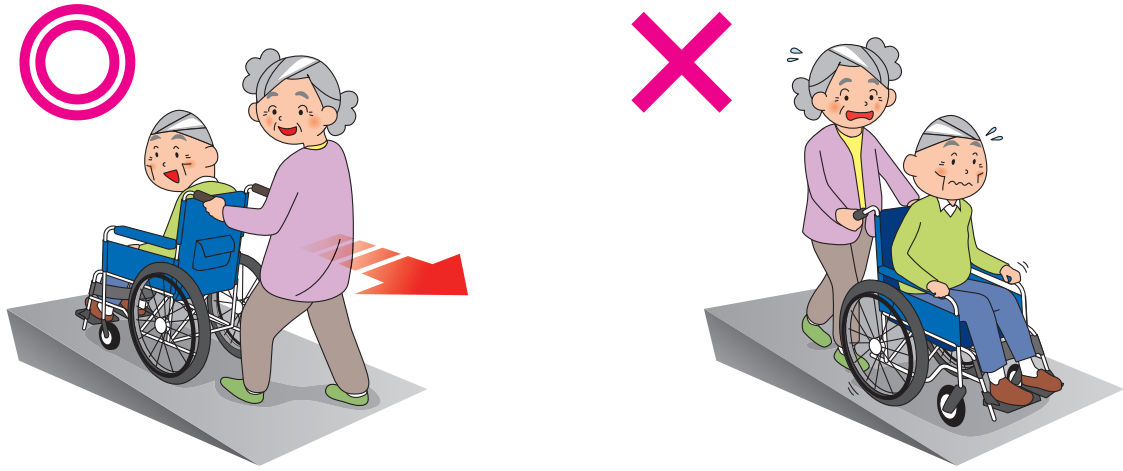

## スロープの選び方

※適用傾斜角度は車椅子の種類やご利用者、介助者の体力等により変化します。下記表は目安としてお使いください。  
※段差に対し最低でも4倍以上の長さのスロープをお使いください。

段差の高さ	5cm	10cm	15cm	20cm	25cm	30cm	35cm	40cm	45cm	50cm	60cm	70cm
歩行器	65cm	70cm	85cm	87.5cm	100cm	120cm	125cm	135cm	150cm	165cm	175cm	200cm
車椅子・ 車椅子 付属品	205cm	240cm	245cm	255cm	285cm							
スロープ												
移動用 リフト・ つり具												
介護保険 購入 対象品												
販売品												

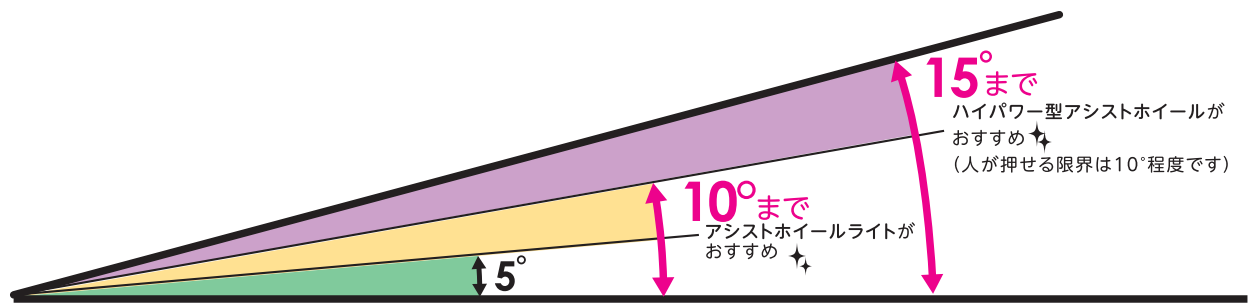

情報

税込価格で表記しています。(非課税 ※非課税 と表記のない商品に限る) 単位:CM


サービスコード/スロープ 介護給付:171008 予防給付:671008

ベッド・  
ベッド  
付属品


## ケアスロープ

ケアメディックス

折り畳み時  
全幅 35

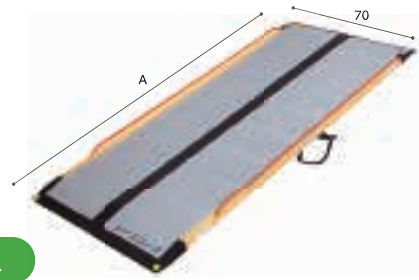

### STEP 1

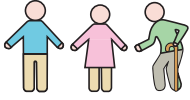

介助者の状況を確認し、選定してください。  
段差の高さを確認し、スロープの長さだけでなく角度も含めて選定してください。

老老介護の場合 推奨角度8°  
スロープの長さ  
||  
段差の高さ × 8倍以上

#### ケアスロープ選定理由例

《CS-175》  
玄関に約20cmの段差があり、間口が71cmの為、設置可能であり、転倒を防止し介助負担を軽減するために選定。

《CS-240C》  
玄関に約30cmの段差があり、間口が71cmの為、設置可能で脱輪防止エッジがあり車いすが安全に移動できるスロープとして選定。

### STEP 2

日本家屋に多い狭い間口・場所でも設置可能な、幅狭設計です。



下部までエッジが無いので、狭い場所で車椅子が直角に乗り入れしやすい設計です。




アルミ製脱輪防止エッジにより衝撃に強く丈夫で安全に走行することができます。

### STEP 3



収納しやすい自立設計です。  
様々な段差に応じて長さを選択できる豊富なラインナップを取り揃えております。

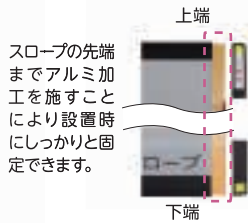

スロープの先端までアルミ加工を施すことにより設置時にしっかりと固定できます。

### STEP 4

設置の際は必ず上端が4cm以上かかっていること、ガタツキがないこと、走行面に異物がないことを確認しうえでご利用ください。



走行面にソフトなすべり止めを採用しているため、室内使用時にスロープの上を裸足でも歩いても痛くありません。

商品名	A(cm)	重さ (kg)	商品番号	商品コード	ご利用者負担額(1割)	ご利用者負担額(2割)	ご利用者負担額(3割)	月額レンタル料金
CS-65	65	約3	28-0979-1	00093-000015	円	円	円	円
CS-100	100	約5	28-0980-1	00093-000016	円	円	円	円
CS-120	120	約6	28-0981-1	00093-000017	円	円	円	円
CS-150	150	約8	28-0982-1	00093-000018	円	円	円	円
CS-175	175	約9	28-0983-1	00093-000019	円	円	円	円
CS-200	200	約10	28-0984-1	00093-000020	円	円	円	円
CS-240C	240	約12	28-1015-1	00093-000021	円	円	円	円
CS-285C	285	約15	28-1092-1	00093-000038	円	円	円	円

床ずれ  
防止用具

体位  
変換器

認知症  
老人徘徊  
感知機器

手すり

歩行  
補助杖

歩行器

車椅子・  
車椅子  
付属品

スロープ

移動用  
リフト・  
つり具

## ケアスロープJ/ケアスロープJ用ジョイント台

ケアメディックス

- スロープを2本つなぎ合わせることで高段差に対応。
- 3つのパーツに分割ができるので運搬、収納が容易です。
- 可搬型スロープでは無い約4mの長尺スロープになります。

下端側ケアスロープ + ケアスロープJ用ジョイント台 + 上端側ケアスロープ = ケアスロープJ



※スロープ全長、重さケアスロープJ用ジョイント台含む ※ケアスロープJ用ジョイント台 幅78×長さ42.5×高さ21~26cm

商品名	スロープ全長	重さ (kg)	商品番号	商品コード	ご利用者負担額(1割)	ご利用者負担額(2割)	ご利用者負担額(3割)	月額レンタル料金
CSJ-300	313	約28	28-1064-1	00093-000022	円	円	円	円
CSJ-325	338	約29	28-1065-1	00093-000023	円	円	円	円
CSJ-350	363	約30	28-1066-1	00093-000024	円	円	円	円
CSJ-390	403	約32	28-1067-1	00093-000025	円	円	円	円

介護保険  
購入  
対象品

販売品

情報



# スロープ

ベッド・  
ベッド  
付属品

床ずれ  
防止用具

体位  
変換器

認知症  
老人徘徊  
感知機器

手すり

歩行  
補助杖

歩行器

車椅子・  
車椅子  
付属品

スロープ


移動用  
リフト・  
つり具

介護保険  
購入  
対象品

## ダンスロープエア

ダンロップホームプロダクツ

在庫限定品

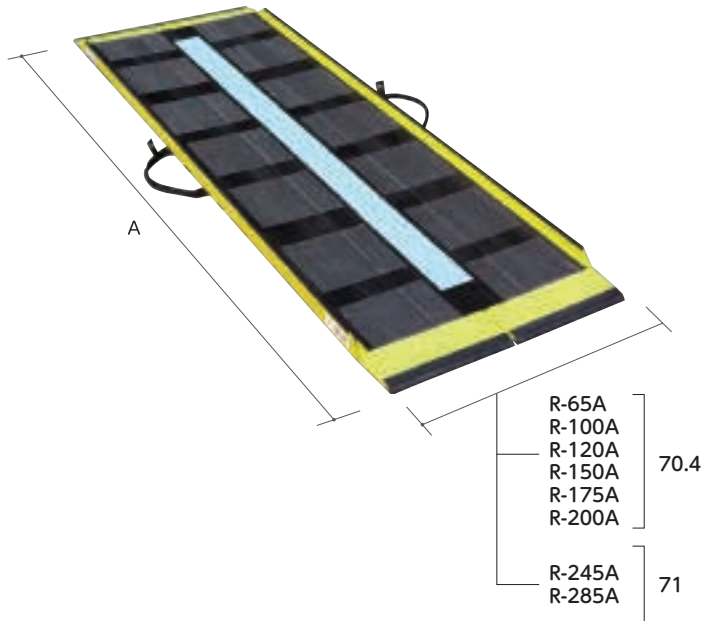

### 1. 業界最軽量クラス

スロープのリーディングカンパニーとして、培われた軽量化・安全・安心・設計技術を生かし、業界最軽量クラスのダンスロープエアを開発。

### 2. 汎用性の向上

全サイズ70.4cm幅とし、今まで設置不可能であった間口に対応します。尚、ハンドル部分も干渉しません。また、サイズ展開も6サイズとなり様々な住宅環境に適応可能です。

### 3. 安全性の確保

高さ3cmのエッジで脱輪を軽減。保護用ゴムの採用で折り畳み時に懸念される指詰めによる怪我の危険性を軽減。上部部にスロープの正しい設置位置マークを表示し、安全にご利用を促しています。

### 4. 補修性の向上

貸与事業者様における補修作業を簡便化。



収納時 (幅35.2cm)



設置 1



設置 2 広げる



使用例

商品名	A(cm)	重さ(kg)	商品番号	商品コード	ご利用者負担額(1割)	ご利用者負担額(2割)	ご利用者負担額(3割)	月額レンタル料金
R-65A	65	約3.5	28-1057-1	00532-000028	円	円	円	円
R-100A	100	約4.5	28-1058-1	00532-000027	円	円	円	円
R-120A	120	約5	28-1059-1	00532-000026	円	円	円	円
R-150A	150	約6	28-1060-1	00532-000025	円	円	円	円
R-175A	175	約7	28-1061-1	00532-000024	円	円	円	円
R-200A	200	約8	28-1062-1	00532-000023	円	円	円	円
R-245A	245	約10	28-1135-1	00532-000030	円	円	円	円
R-285A	285	約11	28-1136-1	00532-000029	円	円	円	円

税込価格で表記しています。( **非課税** ※非課税 と表記のない商品に限る) **単位:CM**

サービスコード/スロープ 介護給付:171008 予防給付:671008

ベッド・  
ベッド  
付属品

## インタースロープ

### モルテン

小さな段差による歩行時のつまづきの防止や、車いす走行時の負担を軽減するための低段差スロープ

安全・安心への配慮



- ずれにくい素材で、置くだけで安全に使用できます。
- 滑りにくい表面形状で、靴下や靴で歩いても安心して使用できます。
- 段差が小さく滑らかな形状なので、すり足でもつまづきにくく、車いすや歩行器でも楽に走行できます。

床ずれ  
防止用具

体位  
変換器

認知症  
老人徘徊  
感知機器

### 設置例



●屋外での設置

●玄関での設置例

●屋外での設置

商品名	重さ(kg)	商品番号	商品コード	ご利用者負担額(1割)	ご利用者負担額(2割)	ご利用者負担額(3割)	月額レンタル料金
76cm×1cm	0.1	28-1079-1	00054-000173	円	円	円	円
76cm×1.5cm	0.3	28-1080-1	00054-000174	円	円	円	円
76cm×2cm	0.6	28-1081-1	00054-000175	円	円	円	円
76cm×2.5cm	0.7	28-1082-1	00054-000176	円	円	円	円
76cm×3cm	1.1	28-1083-1	00054-000177	円	円	円	円
76cm×3.5cm	1.7	28-1084-1	00054-000178	円	円	円	円
76cm×4cm	1.4	28-1085-1	00054-000179	円	円	円	円
76cm×4.5cm	2.1	28-1086-1	00054-000180	円	円	円	円
76cm×5cm	2.9	28-1087-1	00054-000181	円	円	円	円
76cm×5.5cm	2.6	28-1088-1	00054-000182	円	円	円	円
76cm×6cm	3.7	28-1089-1	00054-000183	円	円	円	円
76cm×6.5cm	4.7	28-1090-1	00054-000184	円	円	円	円

手すり

歩行  
補助杖

歩行器


車椅子・  
車椅子  
付属品

スロープ

移動用  
リフト・  
つり具

## エコ段差スロープN

### マツ六

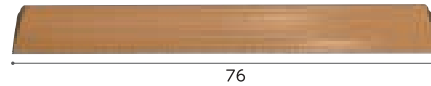

商品名	高さ(cm)	奥行き(cm)	勾配度数(kg)	商品番号	商品コード	ご利用者負担額(1割)	ご利用者負担額(2割)	ご利用者負担額(3割)	月額レンタル料金
10N	1	4	0.2	28-1030-1	01265-000120	円	円	円	円
14N	1.4	6	0.3	28-1016-1	01265-000095	円	円	円	円
20N	2	8	0.6	28-1017-1	01265-000096	円	円	円	円
25N	2.5	10	1	28-1018-1	01265-000097	円	円	円	円
30N	3	12	1.3	28-1019-1	01265-000098	円	円	円	円
35N	3.5	14	1.9	28-1026-1	01265-000116	円	円	円	円
40N	4	16	2.3	28-1027-1	01265-000117	円	円	円	円
45N	4.5	18	2.9	28-1028-1	01265-000118	円	円	円	円
50N	5	20	3.6	28-1029-1	01265-000119	円	円	円	円
55N	5.5	22	4.7	28-1031-1	01265-000121	円	円	円	円
60N	6	24	5.7	28-1032-1	01265-000122	円	円	円	円

介護保険  
購入  
対象品

販売品

情報