



# 車椅子・車椅子付属品

## 車椅子の機能と名称

ベッド・  
ベッド  
付属品

床ずれ  
防止用具

体位  
変換器

認知症  
老人徘徊  
感知機器

手すり

歩行  
補助杖

歩行器

車椅子・  
車椅子  
付属品

スロープ

移動用  
リフト・  
つり具

介護保険  
購入  
対象品

販売品

情報

**背シート**  
背張り調節  
ご利用者の体の状態に合わせて背シートの張りが調節できます。  
リクライニング  
背シートが後方に倒れます。

**ハンドグリップ**  
グリップ高さ調節  
介助者の手の位置に合わせてグリップの高さを調節できます。

**アームサポート (ひじ当て)**  
ひじ当てウイング  
ひじ当てがはね上がり、移乗に便利です。  
ひじ当て高さ調節  
ご利用者の体に合わせてひじ当ての高さが調整できます。

**介助用ブレーキレバー**  
介助用ブレーキレバー  
介助用のブレーキレバーが付いています。

**座シート**  
クッション  
長時間座っていても疲れにくく、床ずれ防止効果もあります。

**ハンドリム**  
**ティッピングレバー**

**タイヤ (後輪)**  
ノーパンクタイヤ  
空気圧の低下や、空気漏れの心配がありません。

**レッグサポート**  
**フットサポート**

**キャスター (前輪)**  
ショックレスキャスター  
屋外などの凸凹のある道でも振動が伝わりにくいキャスターです。  
ティルト  
座シートと背シートの角度はそのままに後方に倒れます。  
シートベルト  
車椅子からずり落ちないように体を固定します。  
スイングアウト  
フット・レッグサポートが外方折りたたみ式で、移乗や片足歩行の時に便利です。

## 重さの色分け

軽 **0.00kg** 13kg 未満

普通 **0.00kg** 13kg~18kg 以上 未満

重 **0.00kg** 18kg 以上

## 車椅子の機能

介護保険  
購入  
対象品

販売品

情報

### 【車椅子(自走)】

- 自分で操作する
- 後輪が大きい
- ハンドリムがある



### 【車椅子(介助)】

- 介助者が操作してくれる
- 後輪が小さい
- コンパクト



### 【ティルト式車椅子】

- 座シートと背シートの角度はそのままに後方に倒れる車椅子
- 頭部までサポート
- 安定した座位姿勢を保つ



### 【リクライニング式車椅子】

- 背シートが後方に倒れる車椅子
- 頭部までサポート
- ストレッチャーとして使用



### 【ティルト・リクライニング式車椅子】

- 両方の機能を備えています

税込価格で表記しています。(非課税 ※非課税と表記のない商品に限る) 単位:cm

サービスコード/車椅子 介護給付:171001 予防給付:671001 /車椅子付属品 介護給付:171002 予防給付:671002

ベッド・  
ベッド  
付属品

床ずれ  
防止用具

体位  
変換器

認知症  
老人徘徊  
感知機器

手すり

歩行  
補助杖

歩行器

車椅子・  
車椅子  
付属品

スロープ

移動用  
リフト・  
つり具

介護保険  
購入  
対象品

販売品

情報

# ケアフィットウイング

CARE FIT WING

— 自走と介助 —



## 1. しっかり ケア

ワンフィットベルト  
1本で、お好みの座り  
心地を!!

## 2. さらにフィット

胸椎・腰椎サポートベルトで、  
心地よく体幹を保持!

## 3. より快適に

アームサポート高さ  
調整・クッションの  
セパレート調整で  
より快適に!!



## 車椅子・車椅子付属品

ベッド・  
ベッド  
付属品床ずれ  
防止用具体位  
変換器認知症  
老人徘徊  
感知機器

手すり

歩行  
補助杖

歩行器

車椅子・  
車椅子  
付属品

スロープ

移動用  
リフト・  
つり具介護保険  
購入  
対象品

販売品

情報

## BAL-1 (自走)

ミキ




ノーパンクタイヤ

軽くて、コンパクト!持ち運びに便利な車椅子

ノーパンクタイヤ標準装備、  
シンプルで使いやすいスタンダードモデル。●ハイポリマータイヤ  
メンテナンスフリーのノーパンク  
タイヤ。  
パンクや空気漏れの心配がない  
ので、とても便利です。

折りたたみ時

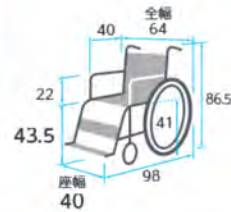

非課税




商品名	商品番号	商品コード
BAL-1	21-5755-0	00122-000451
前輪:6インチ 後輪:22インチ 折りたたみ:全幅33.5×全高67×全長96.5cm		
ご利用者 負担額 (1割)	(2割) 円	(3割) 円
		月額レンタル料金 円

## カルッタ (自走) CRT-1

ミキ



軽くて、コンパクト!持ち運びに便利な車椅子

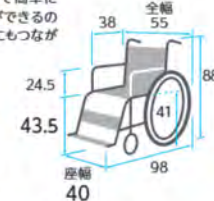新ハイパーXフレーム  
車椅子の心臓部である  
Xフレームを見直し、  
軽量化と剛性を両立。  
更に乗り心地もアップし  
ました。新構造ワンタッチシート(特許出願済)  
背・座シートともに工具なしで簡単に  
シートの取り付け・取り外しができるの  
で、メンテナンスの時間短縮にもつな  
がります。軽量ハイポリマータイヤ(黒)  
従来より軽量のメンテナ  
ンスフリーのノーパンクタイヤ。  
パンクや空気漏れの心配が  
ないので、とても便利です。

非課税



商品名	商品番号	商品コード
CRT-1(ネイビー)	21-6717-0	00122-000560
前輪:6インチ 後輪:22インチ 折りたたみ:全幅32×全高70.5×全長93cm		
ご利用者 負担額 (1割)	(2割) 円	(3割) 円
		月額レンタル料金 円

## ふわりす(KF)シリーズ (自走) KF22-40SB (エア軽量タイヤ仕様)

カワムラサイクル



軽くて、コンパクト!持ち運びに便利な車椅子


耐荷重100kgの軽量車椅子で  
標準車と変わらない使いやすさ

こぎやすいバックサポート角

バックサポートを8度後傾させる  
ことにより、シートが背中に沿い  
やすくなります。駆動の際も腕の  
動きをジャマしません。

フットサポート・シート間距離調節(2cmピッチ)

3段階で調節できます。

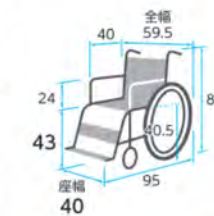・利用者、介助者が使いやすい  
アームサポート長さ  
・バンド式ブレーキ標準装備  
・サイドガード標準装備

非課税



商品名	商品番号	商品コード
KF22-40SB (すみれパープル)	21-6217-0	00160-000241
前輪:6インチ 後輪:22インチ 折りたたみ:全幅33×全高66×全長93cm		
ご利用者 負担額 (1割)	(2割) 円	(3割) 円
		月額レンタル料金 円

重量  
9.6  
kg

税込価格で表記しています。(非課税 ※非課税と表記のない商品に限る) 単位:cm

サービスコード/車椅子 介護給付:171001 予防給付:671001/車椅子付属品 介護給付:171002 予防給付:671002

ベッド・  
ベッド  
付属品

### ケアフィットプラス(自走)

ミキ



**ケアフィットプラス**  
CARE FIT PLUS G

重さ 12.9kg  
※重量はクッション含まず

背張り調整により座位姿勢のバランス維持をサポートする車椅子



**ワンフィットベルト**  
実用新案出願済の背張り調節機能。短時間でのフィッティングが可能です。


**かたさの異なる2種類のエラストックウェビングベルトがやさしくフィットします。**

**座奥行 36cm**

小柄な方の多い日本人高齢者に適したサイズ設計です。

ご利用者様に合わせて座面高を3サイズからお選びいただけます。

グリーンケア	非課税
力能用ブレーキ	リクライニング
背張り調節	クッション
ノーパンクタイヤ	ショールームキッズ

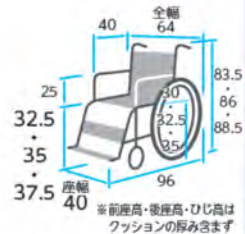

商品名	商品番号	商品コード
ケアフィットプラス	21-6183-0	00122-000530
前輪:6インチ 後輪:20インチ 折りたたみ:全幅31×全高60・62.5・65×全長91cm クッション厚:6cm		
ご利用者負担額 (1割)	(2割)	円 月額レンタル料金
	円 (3割)	円

床ずれ  
防止用具

体位  
変換器

認知症  
老人徘徊  
感知機器

手すり

### ネクストコア(自走) NEXT-11B HB/NEXT-11B

松永製作所



ハイブリッドタイヤ  
衝撃吸収性の良い  
ノーパンクタイヤ。  
エアータイヤに近い  
乗り心地です。  
空気不足によるブレ  
ーキの効きに影  
響ができません。

重さ 12.4kg  
重さ 11.8kg  
NEXT-11B HB NEXT-11B

背張り調整により座位姿勢のバランス維持をサポートする車椅子

スリム&軽量を実現。左右独立の背張り調整可能な立体スリングシートを採用し、側彎の方にも対応可能です。




●背フレーム後方曲げ&背張り調整(NEXT CORE シリーズ共通)  
円筒の方でもお尻を奥までしっかり入れた上で、体を起こして座ることが出来ます。



●フットサポート調整  
フットサポート高さを工具を使わずに調整できる新機構を採用しました。

力能用ブレーキ	リクライニング	非課税
背張り調節	クッション	
ノーパンクタイヤ	ショールームキッズ	

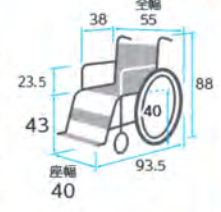

商品名	商品番号	商品コード
NEXT-11B(ブルー)	21-5953-0	00066-000315
前輪:6インチ 後輪:22インチ 折りたたみサイズ:全幅29×全高65.5×全長93.5cm		
ご利用者負担額 (1割)	(2割)	円 月額レンタル料金
	円 (3割)	円

歩行  
補助杖

歩行器

車椅子・  
車椅子  
付属品

スロープ

移動用  
リフト・  
つり具

### カルティマ(自走) CRT-5

ミキ



重さ 9.9kg

軽くて、コンパクト!持ち運びに便利な車椅子




**新ハイパー-Xフレーム**  
車椅子の心臓部であるXフレームを見直し、軽量化と剛性を両立。更に乗り心地もアップしました。

**ワンハンドブレーキ(特許出願済)**  
左右いずれか一方のレバーを引くことで、両輪の駐車ブレーキをかけることができます。また、伸縮延長レバーを伸ばすと軽い力でブレーキを操作することができます。



**軽量ハイポリマータイヤ(黒)**  
従来より軽量のメンテナンフリーのノーパンクタイヤ。パンクや空気漏れの心配がないので、とても便利です。

力能用ブレーキ	リクライニング	非課税
背張り調節	クッション	
ノーパンクタイヤ	ショールームキッズ	

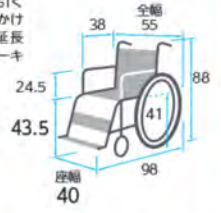

商品名	商品番号	商品コード
CRT-5(ネイビー)	21-6721-0	00122-000568
前輪:6インチ 後輪:22インチ 折りたたみサイズ:全幅32×全高70.5×全長93cm		
ご利用者負担額 (1割)	(2割)	円 月額レンタル料金
	円 (3割)	円

介護保険  
購入  
対象品

販売品

情報



## 車椅子・車椅子付属品

ベッド・  
ベッド  
付属品床ずれ  
防止用具体位  
変換器認知症  
老人徘徊  
感知機器

手すり

重さ  
9.6  
kg歩行  
補助杖

歩行器

車椅子・  
車椅子  
付属品

スロープ

移動用  
リフト・  
つり具介護保険  
購入  
対象品

販売品

情報

## ふわりす(KF)シリーズ(自走) KF22-405B(エア軽量タイヤ仕様)

カワムラサイクル



軽くて、コンパクト!持ち運びに便利な車椅子


非課税

耐荷重100kgの軽量車椅子で  
標準車と変わらない使いやすさ

## こぎやすいバックサポート角

バックサポートを8度後傾させる  
ことにより、シートが背中に沿い  
やすくなります。駆動の際も腕の  
動きをジャマしません。

## フットサポート・シート間距離調節(2cmピッチ)

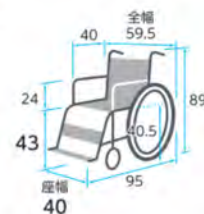3段階で調節できます。  
・利用者、介助者が使いやすい  
アームサポート長さ  
・バンド式ブレーキ標準装備  
・サイドガード標準装備

商品名	商品番号	商品コード
KF22-405B(すみれパープル)	21-6217-0	00160-000241
前輪:6インチ 後輪:22インチ 折りたたみ:全幅33×全高66×全長93cm		
ご利用者 負担額 (1割)	(2割) 円	月額レンタル料金 (3割) 円

## カルッタ(介助) CRT-2

ミキ



軽くて、コンパクト!持ち運びに便利な車椅子

非課税

新ハイパーXフレーム  
車椅子の心臓部である  
Xフレームを見直し、  
軽量化と剛性を両立。  
更に乗り心地もアップし  
ました。新構造ワンタッチシート(特許出願済)  
背・座シートともに工具なしで簡単に  
シートの取り付け・取り外しができるの  
で、メンテナンスの時間短縮にもつな  
がります。軽量ハイポリマータイヤ(黒)  
従来より軽量のメンテナンス  
フリーのノーパンクタイヤ。  
パンクや空気漏れの心配が  
ないので、とても便利です。

商品名	商品番号	商品コード
CRT-2(ネイビー)	21-6718-0	00122-000562
前輪:6インチ 後輪:14インチ 折りたたみサイズ:全幅25×全高70.5×全長85cm		
ご利用者 負担額 (1割)	(2割) 円	月額レンタル料金 (3割) 円

## ふわりす(KF)シリーズ(介助) KF16-405B(エア軽量タイヤ仕様)

カワムラサイクル



軽くて、コンパクト!持ち運びに便利な車椅子


非課税

耐荷重100kgの軽量車椅子で  
標準車と変わらない使いやすさ

## 外出時の負担を軽減

8.9kgと軽量なので車載など  
の持ち上げもラクラク。

## フットサポート・シート間距離調節(2cmピッチ)

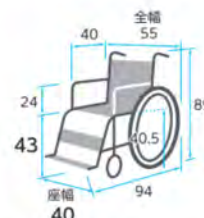3段階で調節できます。  
・利用者、介助者が使いやすい  
アームサポート長さ  
・バンド式ブレーキ標準装備  
・サイドガード標準装備

商品名	商品番号	商品コード
KF16-405B(すみれパープル)	21-6218-0	00160-000240
前輪:6インチ 後輪:16インチ 折りたたみ:全幅28×全高66×全長84cm		
ご利用者 負担額 (1割)	(2割) 円	月額レンタル料金 (3割) 円

重さ  
8.9  
kg

税込価格で表記しています。(非課税 ※非課税と表記のない商品に限る) 単位:cm

サービスコード/車椅子 介護給付:171001 予防給付:671001/車椅子付属品 介護給付:171002 予防給付:671002

ベッド・  
ベッド  
付属品

### ケアフィットプラス (介助)

ミキ



**ケアフィットプラス**  
CARE FIT PLUS

高さ  
11.6  
kg

※重量はクッション含まず

背張り調整により座位姿勢のバランス維持をサポートする車椅子

ワンフィットベルトとエラストックベルトの組み合わせで、利用者の背中をやさしくサポートする車椅子です。




**ワンフィットベルト**  
実用新案出願済の高張り調節機能。短時間でのフィッティングが可能です。

**かたさの異なる2種類のエラストックウェビングベルトがやさしくフィットします。**



ご利用者様に合わせて座面高を3サイズからお選びいただけます。

グリーンケア	非課税
リクライニング	リクライニング
背張り調節	背張り調節
クッション	クッション
ジョイントキャスター	ジョイントキャスター

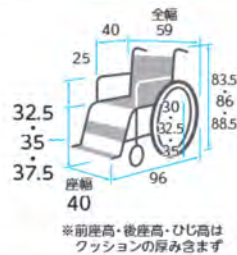

商品名	商品番号	商品コード
ケアフィットプラス	21-6385-0	00122-000543
前輪:6インチ 後輪:16インチ 折りたたみサイズ:全幅27×全高60・62.5・65×全長85cm クッション厚さ:6cm		
ご利用者負担額 (1割)	(2割)	円 月額レンタル料金
	円 (3割)	円

床ずれ  
防止用具

体位  
変換器

認知症  
老人徘徊  
感知機器

手すり

### ネクストコア (介助) NEXT-21B HB/NEXT-21B

松永製作所



ハイブリッドタイヤ  
衝撃吸収性の良い  
ノーパンクタイヤ。  
エアータイヤに近い  
乗り心地です。  
空気不足によるブレ  
ーキの効きに影  
響がでません。

高さ  
11.4  
kg

高さ  
10.8  
kg

NEXT-21B HB NEXT-21B

背張り調整により座位姿勢のバランス維持をサポートする車椅子

扱いやすさと機能を両立したネクストコアシリーズのスタンダードタイプ。左右独立の背張り調整可能な立体スリングシートを採用し、側面にも対応可能です。




●背フレーム後方曲げ&  
背張り調整  
(NEXT CORE シリーズ共通)  
円高の方でもお尻を奥までしっかり入れた上で、体を起こして座ることが出来ます。



●フットサポート調整  
フットサポート高さを工具を使わずに調整できる新機構を採用しました。

リクライニング	リクライニング
背張り調節	背張り調節
クッション	クッション
ジョイントキャスター	ジョイントキャスター

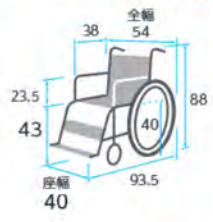

商品名	商品番号	商品コード
NEXT-21B(ブルー)	21-5954-0	00066-000316
前輪:6インチ 後輪:16インチ 折りたたみサイズ:全幅28×全高65.5×全長93.5cm		
ご利用者負担額 (1割)	(2割)	円 月額レンタル料金
	円 (3割)	円

歩行  
補助杖

歩行器

車椅子・  
車椅子  
付属品

スロープ

移動用  
リフト・  
つり具

### カルティマ (介助) CRT-6

ミキ



高さ  
9.1  
kg

軽くて、コンパクト!持ち運びに便利な車椅子




**新ハイパー-Xフレーム**  
車椅子の心臓部であるXフレームを見直し、軽量化と剛性を両立。更に乗り心地もアップしました。

**ワンハンドブレーキ (特許出願済)**  
左右いずれか一方のレバーを引くことで、両輪の駐車ブレーキをかけることができます。また、伸縮延長レバーを伸ばすと軽い力でブレーキを操作することができます。



●軽量ハイポリマータイヤ (黒)  
従来より軽量のメンテナスフリーのノーパンクタイヤ。パンクや空気漏れの心配がないので、とても便利です。

リクライニング	リクライニング
背張り調節	背張り調節
クッション	クッション
ジョイントキャスター	ジョイントキャスター

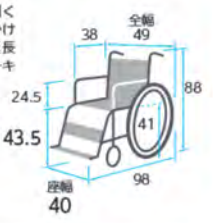

商品名	商品番号	商品コード
CRT-6(ネイビー)	21-6722-0	00122-000570
前輪:6インチ 後輪:14インチ 折りたたみサイズ:全幅25×全高70.5×全長85cm		
ご利用者負担額 (1割)	(2割)	円 月額レンタル料金
	円 (3割)	円

介護保険  
購入  
対象品

販売品

情報



# 車椅子・車椅子付属品

ベッド・  
ベッド  
付属品

床ずれ  
防止用具

体位  
変換器

認知症  
老人徘徊  
感知機器

手すり

歩行  
補助杖

歩行者

車椅子・  
車椅子  
付属品

スロープ

移動用  
リフト・  
つり具

介護保険  
購入  
対象品

販売品

情報

## ケアフィットウイング (自走)

ミキ



ケアフィットウイング  
CARE FIT WING

アームサポートが跳ね上がり、フット・レッグサポートが外側へひらく、移乗に便利な車椅子


ワンフィットベルトと3Dフレームにより、小柄な方や円背の方にもやさしくフィットします。



ウイング シングアクト



体にフィット

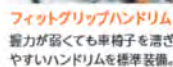


フィットグリップハンドリム

胸椎下部を支える胸椎サポートベルト、及び骨盤を支えるための腰椎サポートベルトを追加。心地よく体幹を安定的に保持します。

腕力が弱くても車椅子を漕ぎやすいハンドリムを標準装備。

グリーン ケア	非課税
リクライニング 機能	ひざ立て 機能
スイング アクト	背張り 機能
ノーバンク タイヤ	ショールズ キスター
	クッション

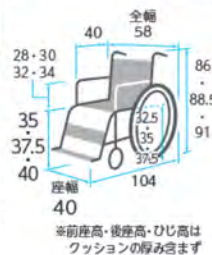

商品名	商品番号	商品コード
ケアフィットウイング	21-6821-0	00122-000584
前輪: 6インチ 後輪: 20インチ 折りたたみ: 全幅29×全高67・64.5・62×全長94cm		
ご利用者負担額 (1割)	(2割) 円	月額レンタル料金 円
	(3割) 円	

## BAL-3 (自走)

ミキ



ノーパンクタイヤ




リクライニング 機能	ひざ立て 機能	リクライニング 機能
スイング アクト	背張り 機能	クッション
ノーバンク タイヤ	ショールズ キスター	

商品名	商品番号	商品コード
BAL-3	21-5863-0	00122-000453
前輪: 6インチ 後輪: 22インチ 折りたたみ: 全幅34.5×全高67×全長73cm		
ご利用者負担額 (1割)	(2割) 円	月額レンタル料金 円
	(3割) 円	

## カルッタ (自走) 多機能タイプ CRT-3

ミキ

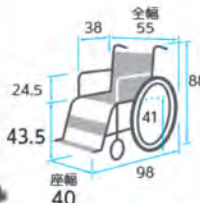

リクライニング 機能	ひざ立て 機能	リクライニング 機能
スイング アクト	背張り 機能	クッション
ノーバンク タイヤ	ショールズ キスター	

商品名	商品番号	商品コード
CRT-3(ネイビー)	21-6719-0	00122-000564
前輪: 6インチ 後輪: 22インチ		
折りたたみサイズ: 全幅32×全高70.5×全長69(フット・レッグサポートをつけたままの場合93) cm		
ご利用者負担額 (1割)	(2割) 円	月額レンタル料金 円
	(3割) 円	

## ネクストコア・マルチ (自走) NEXT-31B NEXT-31B HB

松永製作所



ハイブリッドタイヤ (HBD/A)




リクライニング 機能	ひざ立て 機能	リクライニング 機能
スイング アクト	背張り 機能	クッション
ノーバンク タイヤ	ショールズ キスター	

商品名	商品番号	商品コード
NEXT-31B(ブルー)	21-6041-0	00066-000318
NEXT-31B HB(ブルー)	21-7017-0	00066-000360
前輪: 6インチ 後輪: 22インチ 折りたたみ: 全幅28×全高65.5×全長95cm クッション厚さ: 前方3cm 後方2cm		
ご利用者負担額 (1割)	(2割) 円	月額レンタル料金 円
	(3割) 円	

## カルティマ (自走) 多機能タイプ CRT-7

ミキ

左右いずれか駐車ブレーキをかけると同様にブレーキがかかる「ワンハンドブレーキ仕様」

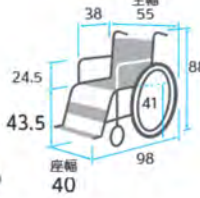

リクライニング 機能	ひざ立て 機能	リクライニング 機能
スイング アクト	背張り 機能	クッション
ノーバンク タイヤ	ショールズ キスター	

商品名	商品番号	商品コード
CRT-7(ネイビー)	21-6723-0	00122-000572
前輪: 6インチ 後輪: 22インチ		
折りたたみ: 全幅32×全高70.5×全長69(フット・レッグサポートをつけたままの場合93) cm		
ご利用者負担額 (1割)	(2割) 円	月額レンタル料金 円
	(3割) 円	

税込価格で表記しています。(非課税 ※非課税と表記のない商品に限る) 単位:cm

サービスコード/車椅子 介護給付:171001 予防給付:671001/車椅子付属品 介護給付:171002 予防給付:671002

ベッド・  
ベッド  
付属品

ケアアジャスト(自走) MC-KM001

アームサポートが跳ね上がり、フット・レッグサポートが  
外側へひらく、移乗に便利な車椅子

座幅や座面高を3サイズからお選びいただけます。  
安心のシートベルト付。軽量モジュールタイプです。



座幅 38・40・42  
※前座高・後座高・ひじ高は  
クッションの厚み含まず

商品名	商品番号	商品コード
MC-KM001	21-5247-0	00122-000304
前輪:6インチ 後輪:22インチ 折りたたみ:全幅32×全高65.5・68・70.5×全長73.5cm クッション厚さ:5cm		
ご利用者 負担額 (1割)	(2割)	円 月額レンタル料金
	円 (3割)	円

ミキ



高さ  
14.7  
kg

床ずれ  
防止用具

体位  
変換器

認知症  
老人徘徊  
感知機器

手すり

ネクストコア・アジャスト(自走) NEXT-51B  
NEXT-51B HB

松永製作所

イージーフィット(自走) MEF-22/MEF-20

ミキ

ハイブリッドタイヤ (HBR/A)

座幅 40

※前座高・後座高・ひじ高は  
クッションの厚み含まず

高さ  
14.6  
kg

高さ  
15.2  
kg

商品名	商品番号	商品コード
NEXT-51B(ブルー)	21-6039-0	00066-000320
NEXT-51B HB(ブルー)	21-7019-0	00066-000362
前輪:6インチ 後輪:22インチ 折りたたみ:全幅28×全高67.5×全長96cm クッション厚さ:前方3cm後方2cm		
ご利用者 負担額 (1割)	(2割)	円 月額レンタル料金
	円 (3割)	円

MEF-22 / 標準

高さ 15.5 kg

高さ 15.2 kg

MEF-22 MEF-20

座幅 40

※前座高・後座高・ひじ高はクッションの厚み含まず

商品名	商品番号	商品コード
MEF-22	21-6774-0	00122-000582
前輪:6インチ 後輪:22インチ 折りたたみサイズ:全幅34×全高64・66・68×全長77cm クッション厚さ:3cm		
ご利用者 負担額 (1割)	(2割)	円 月額レンタル料金
	円 (3割)	円
商品名	商品番号	商品コード
MEF-20	21-6776-0	00122-000581
前輪:5インチ 後輪:20インチ 折りたたみサイズ:全幅34×全高61.5・63.5・65.5×全長75cm クッション厚さ:3cm		
ご利用者 負担額 (1割)	(2割)	円 月額レンタル料金
	円 (3割)	円

歩行  
補助杖

歩行器

車椅子・  
車椅子  
付属品

スロープ

移動用  
リフト・  
つり具


スキット1000(自走) SKT-1000

アームサポートが跳ね上がり、フット・レッグサポートが  
外側へひらく、移乗に便利な車椅子

座面高モジュール シート幅モジュール 身体状況や使用環境の変化に応じて、「座面高・シート幅」をそれぞれ3段階に調整することができます。

テンション調整式シート シーティングの心地よさを追求し生み出された調整式シートです。座ったまま調整ができるようになりました。

ロックブレーキ 従来はタイヤに対して点で押し付けて停止するタイプでしたが、ロックブレーキは面で押し付けてタイヤをがっちりホールド。制動力が大幅に向上。空気圧の低いタイヤでもしっかり停止します。

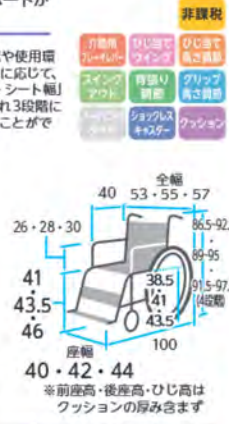

座幅 40・42・44  
※前座高・後座高・ひじ高は  
クッションの厚み含まず

商品名	商品番号	商品コード
SKT-1000(ブルー)	21-6208-0	00122-000524
前輪:6インチ 後輪:22インチ 折りたたみサイズ:全幅32×全高66.5×全長75cm クッション厚さ:6cm		
ご利用者 負担額 (1割)	(2割)	円 月額レンタル料金
	円 (3割)	円

ミキ



高さ  
17.9  
kg

介護保険  
購入  
対象品

販売品

情報



ベッド・  
ベッド  
付属品



# 車椅子・車椅子付属品

床ずれ  
防止用具

## ケアアジャスト (介助) MC-KM002

ミキ



体位  
変換器

認知症  
老人徘徊  
感知機器


手すり

重さ  
13.0  
kg

歩行  
補助杖

アームサポートが跳ね上がり、フット・レッグサポートが  
外側へひらく、移乗に便利な車椅子

座幅や座面高を3サイズからお選びいただけます。  
安心のシートベルト付。軽量モジュールタイプです。

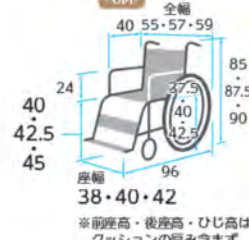


商品名	商品番号	商品コード
MC-KM002	21-5246-0	00122-000305
前輪:6インチ 後輪:16インチ 折りたたみ:全幅30×全高65.5・68・70.5×全長65cm クッション厚さ:5cm		
ご利用者 負担額 (1割)	(2割)	円 月額レンタル料金 (3割) 円

## BAL-4 (介助)

ミキ



ノーパンクタイヤ

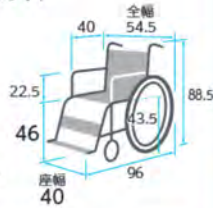

重さ  
13.2  
kg


歩行者

車椅子・  
車椅子  
付属品

スロープ

## カルッタ (介助) 多機能タイプ CRT-4

ミキ

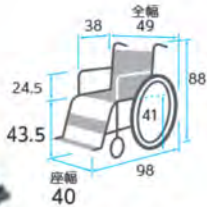

重さ  
10.5  
kg

移動用  
リフト・  
つり具

商品名	商品番号	商品コード
CRT-4(ネイビー)	21-6720-0	00122-000566
前輪:6インチ 後輪:14インチ		
折りたたみサイズ:全幅25×全高70.5×全長64(フット・レッグサポートをつけたままの場合88) cm		
ご利用者 負担額 (1割)	(2割)	円 月額レンタル料金 (3割) 円

## ネクストコア・マルチ (介助) NEXT-41B NEXT-41B HB

松永製作所



ハイブリードタイヤ (HBD/A)



重さ  
12.2  
kg

重さ  
12.8  
kg

介護保険  
購入  
対象品


販売品

情報

## カルティマ (介助) 多機能タイプ CRT-8

ミキ

左右いずれか駐車ブレーキをかけた  
両輪にブレーキがかかる「ワンハンドブレーキ仕様」

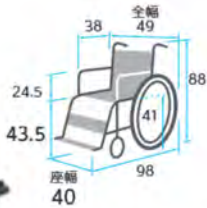

重さ  
10.5  
kg

商品名	商品番号	商品コード
CRT-8(ネイビー)	21-6724-0	00122-000574
前輪:6インチ 後輪:14インチ		
折りたたみ:全幅25×全高70.5×全長64(フット・レッグサポートをつけたままの場合88) cm		
ご利用者 負担額 (1割)	(2割)	円 月額レンタル料金 (3割) 円

商品名	商品番号	商品コード
NEXT-41B(ブルー)	21-6042-0	00066-000319
NEXT-41B HB(ブルー)	21-7018-0	00066-000361
前輪:6インチ 後輪:16インチ 折りたたみ:全幅27×全高65.5×全長94.5cm クッション厚さ:前方3cm厚方2cm		
ご利用者 負担額 (1割)	(2割)	円 月額レンタル料金 (3割) 円

税込価格で表記しています。(非課税 ※非課税と表記のない商品に限る) 単位:cm

サービスコード/車椅子 介護給付:171001 予防給付:671001/車椅子付属品 介護給付:171002 予防給付:671002

ベッド・  
ベッド  
付属品

### ケアアジャスト (介助) MC-KM002


ミキ



高さ  
13.0  
kg

アームサポートが跳ね上がり、フット・レッグサポートが  
外側へひらく、移乗に便利な車椅子

座幅や座面高を3サイズからお選びいただけます。  
安心のシートベルト付。軽量モジュールタイプです。

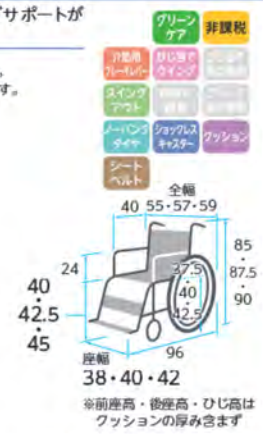

商品名	商品番号	商品コード
MC-KM002	21-5246-0	00122-000305
前輪:6インチ 後輪:16インチ 折りたたみ:全幅30×全高65.5・68・70.5×全長65cm クッション厚さ:5cm		
ご利用者 負担額 (1割)	(2割)	円 月額レンタル料金
	円 (3割)	円

床ずれ  
防止用具

体位  
変換器

認知症  
老人徘徊  
感知機器

手すり

### ネクストコア・アジャスト (介助) NEXT-61B NEXT-61B HB

松永製作所




高さ  
13.6  
kg  
高さ  
14.2  
kg



商品名	商品番号	商品コード
NEXT-61B (ブルー)	21-6040-0	00066-000321
NEXT-61B HB (ブルー)	21-7020-0	00066-000363
前輪:6インチ 後輪:16インチ 折りたたみ:全幅28×全高67.5×全長95.5cm クッション厚さ:前方3cm後方2cm		
ご利用者 負担額 (1割)	(2割)	円 月額レンタル料金
	円 (3割)	円

### イージーフィット (介助) MEF-16/MEF-14

ミキ

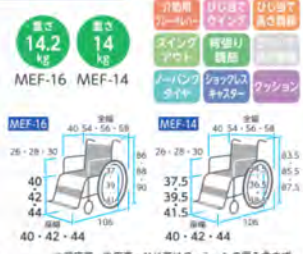

商品名	商品番号	商品コード
MEF-16	21-6775-0	00122-000580
前輪:6インチ 後輪:16インチ 折りたたみサイズ:全幅29×全高64・66・68×全長72.5cm クッション厚さ:3cm		
ご利用者 負担額 (1割)	(2割)	円 月額レンタル料金
	円 (3割)	円
商品名	商品番号	商品コード
MEF-14	21-6777-0	00122-000579
前輪:5インチ 後輪:14インチ 折りたたみサイズ:全幅29×全高61.5・63.5・65.5×全長72.5cm クッション厚さ:3cm		
ご利用者 負担額 (1割)	(2割)	円 月額レンタル料金
	円 (3割)	円

歩行  
補助杖

歩行器

車椅子・  
車椅子  
付属品

スロープ

移動用  
リフト・  
つり具

### スキット2000 (介助) SKT-2000

ミキ



高さ  
16.3  
kg




アームサポートが跳ね上がり、フット・レッグサポートが  
外側へひらく、移乗に便利な車椅子

座面高モジュール シート幅モジュール 身体状況や使用環境  
の変化に応じて、  
「座面高・シート幅」  
をそれぞれ3段階に  
調整することが  
できます。

デンション調整式シート  
シーティングの心地よさを追  
求め生み出された調整式シ  
ートです。座ったまま調整がで  
きるようになりました。

ロックンブレーキ  
従来はタイヤに対して点で押し付  
けて停止するタイプでしたが、  
ロックンブレーキは面で押し付け  
てタイヤをがっちりホールド。制  
動力が大幅に向上。空気圧の低  
いタイヤでもしっかり停止します。

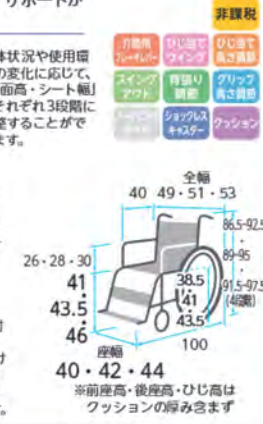

商品名	商品番号	商品コード
SKT-2000 (ブルー)	21-6210-0	00122-000525
前輪:6インチ 後輪:14インチ 折りたたみサイズ:全幅27×全高66.5・69・71.5×全長66cm クッション厚さ:6cm		
ご利用者 負担額 (1割)	(2割)	円 月額レンタル料金
	円 (3割)	円

介護保険  
購入  
対象品

販売品

情報

ベッド・  
ベッド  
付属品



# 車椅子・車椅子付属品

床ずれ  
防止用具

体位  
変換器

認知症  
老人徘徊  
感知機器

手すり

歩行  
補助杖

歩行者

車椅子・  
車椅子  
付属品

スロープ

移動用  
リフト・  
つり具

介護保険  
購入  
対象品

販売品


情報

## ネクストコアくるり(自走)

松永製作所

高さ 18.5 kg  
自走 低床  
NEXT-70B

高さ 19 kg  
自走 中床  
NEXT-71B

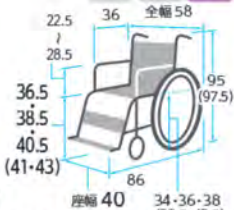

※ ( ) は NEXT-71B サイズ  
※ 前座高・後座高・ひじ高はクッションの厚み含まず

商品名	商品番号	商品コード
NEXT-70B 低床(ブルー)	21-6377-0	00066-000335
NEXT-71B 中床(ブルー)	21-6375-0	00066-000333

前輪:4インチ 後輪:20(22)インチ 最大キャスター:4インチ 折りたたみサイズ:全幅34×全高65(67.5)×全長86cm クッション厚さ:座高3cm 座幅2cm


ご利用者負担額 (1割)	(2割)	円	月額レンタル料金	円
		円		円

## ネクストコアくるり(介助)

松永製作所

高さ 17.2 kg  
介助 低床  
NEXT-80B

高さ 18 kg  
介助 中床  
NEXT-81B

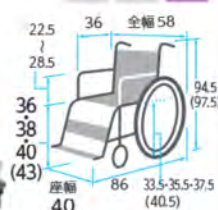

※ ( ) は NEXT-81B サイズ  
※ 前座高・後座高・ひじ高はクッションの厚み含まず

商品名	商品番号	商品コード
NEXT-80B 低床(ブルー)	21-6378-0	00066-000336
NEXT-81B 中床(ブルー)	21-6376-0	00066-000334

前輪:4インチ 後輪:12(16)インチ 最大キャスター:4インチ 折りたたみサイズ:全幅34×全高65(67.5)×全長86cm クッション厚さ:座高3cm 座幅2cm

ご利用者負担額 (1割)	(2割)	円	月額レンタル料金	円
		円		円

## ラクーネ2(自走)

ミキ



商品名	商品番号	商品コード
ラクーネ2	21-5940-0	00122-000477

前輪:6インチ 後輪:22インチ

折りたたみサイズ:全幅38.5×全高78×全長75cm

ご利用者負担額 (1割)	(2割)	円	月額レンタル料金	円
		円		円

## ラクーネ3(介助)

ミキ



商品名	商品番号	商品コード
ラクーネ3	21-5941-0	00122-000486

前輪:6インチ 後輪:14インチ

折りたたみサイズ:全幅25×全高67・69.5・72×全長65.2cm

ご利用者負担額 (1割)	(2割)	円	月額レンタル料金	円
		円		円

## とまっティ(自走) MBY-41B

ミキ

立ち上がると車椅子後方移動を制御する装置が働く「ノンバックブレーキ付」



※前座高・後座高・ひじ高はクッションの厚み含まず

商品名	商品番号	商品コード
MBY-41B(エメラルド)	21-6191-0	00122-000528

前輪:6インチ 後輪:22インチ 折りたたみ:全幅38×全高69×全長95cm クッション厚さ:4cm

ご利用者負担額 (1割)	(2割)	円	月額レンタル料金	円
		円		円

## とまっティ(自走) MBY-47B

ミキ

立ち上がると車椅子後方移動を制御する装置が働く「ノンバックブレーキ付」



※前座高・後座高・ひじ高はクッションの厚み含まず

商品名	商品番号	商品コード
MBY-47B(イエロー)	21-6177-0	00122-000529

前輪:6インチ 後輪:22インチ 折りたたみ:全幅38×全高75×全長96cm

ご利用者負担額 (1割)	(2割)	円	月額レンタル料金	円
		円		円

税込価格で表記しています。(非課税 ※非課税 と表記のない商品に限る) **単位:cm**

サービスコード/車椅子 介護給付:171001 予防給付:671001 /車椅子付属品 介護給付:171002 予防給付:671002

ベッド・  
ベッド  
付属品

### TRC-3DX/TRC-3DX用マルチエルゴエレベーター

ミキ



重さ  
24.5kg



**ティルト機能**  
おしり、太ももにかかる体重を背中や腰に分散させることができます。前ずれ防止にもなります。

**リクライニング機能**  
おしり、背もたれの角度を自在に調節し、座位保持を有効にします。

**ティルト機能+リクライニング機能**  
ゆったりとくつろぎたい時、障害によって姿勢の変換が必要な方や、障害によるバランス機能の低下をサポートします。

座と背シートの角度はそのまま後方に倒れるティルト機能に加え背シートの角度調整も可能なリクライニング機能付き


コンパクトで多機能なティルト&リクライニング車椅子。操作がより簡単安心に!包み込むような安心のホールド感。長時間の座位姿勢がより安全・快適に保つことができます。



### TRC-3DX用マルチエルゴエレベーター



エレベーター時の脚長差によるズレが起こりにくく、レッグサポートの位置と角度調整ができて、最適なサポートが得られます。フットサポートは前後・左右・角度調整が可能。

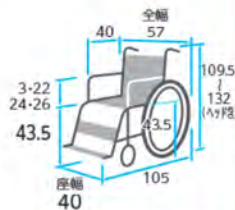

※前座高・後座高・ひじ高はクッションの厚み含まず

商品名	商品番号	商品コード
TRC-3DX	21-6765-0	00122-000583
前輪:6インチ 後輪:14インチ 折りたたみ:全幅36×全高67.5×全長80.5cm ティルト角度:0~20° リクライニング角度:90~110°		
ご利用者負担額 (1割)	(2割) 円	月額レンタル料金 円
ご利用者負担額 (3割) 円		
商品名	商品番号	商品コード
TRC-3DX用マルチエルゴエレベーター	29-8380-1	00122-000436
左右別々に脚部の角度を無段階(12~71度)調節、ステップ(足台)角度調整(±4.5度)		
ご利用者負担額 (1割)	(2割) 円	月額レンタル料金 円
ご利用者負担額 (3割) 円		

床ずれ  
防止用具

体位  
変換器

認知症  
老人徘徊  
感知機器

手すり

歩行  
補助杖

歩行器

車椅子・  
車椅子  
付属品

スロープ

移動用  
リフト・  
つり具

### スキット7(介助) SKT-7

ミキ




重さ  
19kg

座と背シートの角度はそのまま後方に倒れるティルト機能付き

チルト仕様で全幅がわずか48cmとコンパクト。狭い場所でも座面角度を調整してゆったり楽に座れます。



チルト機能が体重を分散

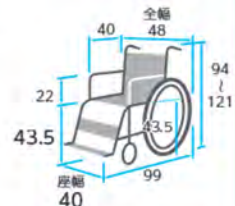

商品名	商品番号	商品コード
SKT-7	21-5722-0	00122-000433
前輪:6インチ 後輪:14インチ チルト角度:0°~約30° 折りたたみサイズ:全幅32×全高70×全長72cm 耐荷重:100kg		
ご利用者負担額 (1割)	(2割) 円	月額レンタル料金 円
ご利用者負担額 (3割) 円		

介護保険  
購入  
対象品

販売品

情報

ベッド・  
ベッド  
付属品



# 車椅子・車椅子付属品

床ずれ  
防止用具

体位  
変換器

認知症  
老人徘徊  
感知機器

手すり

歩行  
補助杖

歩行器

車椅子・  
車椅子  
付属品

スロープ

移動用  
リフト・  
つり具

介護保険  
購入  
対象品

販売品

情報

## マイチルト-ミニ3D スイングアウト&エレベーター・リフトアップ付

松永製作所



高さ  
29  
kg

### 室内での移動に便利な2つのポイント

- 超コンパクトサイズ  
全長 89cm / 全幅 53cm
- リフトアップ機構



### 便利な機能


- ハイブリッドタイヤ
- 前後運動フットブレーキ
- スロープに傷つけないバンパー

座と背シートの角度はそのまま後方に倒れるティルト機能に加え  
背シートの角度調整も可能なリクライニング機能付き

マイチルト-ミニ3D専用  
スイングアウト&エレベーターユニット  
(フットサポート直下型)

### 姿勢へのアプローチ4つのポイント

- 3D 立体スリングシート  
ネクストコアシリーズ・マイチルトコンパクト3D同様の3D  
立体スリングシートで背中をしっかりささえます。
- ポジティブ機構  
背フレーム上方が前折れ調整が可能です。円背の方の背中を  
全体的にささえやすくなります。
- フットサポート直下構造&前後角度調整  
足をしっかり引いて座ることができるので、  
膝関節の屈曲拘縮がある方や、尖足の方も  
ささえやすくなります。
- スネークヘッドサポート  
既存のヘッドサポートよりも低いポジションから設  
定ができ、上下・前後・左右まで自在に設定可能です。

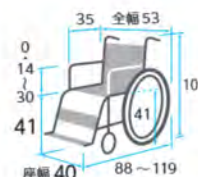

※前座高・後座高・ひじ高は  
クッションの厚み含まず

商品名	商品番号	商品コード
MH-SRL-SE F02(ブルー)	21-6858-0	00066-000352
前輪:5インチ 後輪:12インチ ティルト角度:0°~25°		
リクライニング角度:90°~110° 耐荷重:100kg クッション厚さ:前6.5、後4cm		
ご利用者 負担額 (1割)	(2割)	円 月額レンタル料金
	円 (3割)	円

## マイチルト・コンパクト介助用 MH-CR3D

松永製作所



高さ  
24.5  
kg

ティルト&リクランのにこのスリムさ!  
在宅でも使えるマイチルト。

- マイチルト・コンパクトは全幅がなんと53cm!
- お家の中でも抜群の使いやすさの甲斐です。
- さらに、姿勢の安定をグンと高める3Dモデルがポイント!
- 「立体スリングシート」、「背フレーム後方曲げ」、「骨盤&体幹サポートフレーム」の3つの工夫で、姿勢を3次元的にサポートします。立体スリングシートは(有)であい工房の登録商標です。



座と背シートの角度はそのまま後方に倒れるティルト機能に加え  
背シートの角度調整も可能なリクライニング機能付き

MH-CR3D用  
スイングアウト&エレベーターユニット



※前座高・後座高・ひじ高は  
クッションの厚み含まず

商品名	商品番号	商品コード
MH-CR3D用スイングアウト& エレベーターユニット	29-6921-1	00066-000297
ご利用者 負担額 (1割)	(2割)	円 月額レンタル料金
	円 (3割)	円

税込価格で表記しています。(非課税 ※非課税と表記のない商品に限る) 単位:cm

サービスコード/車椅子 介護給付:171001 予防給付:671001/車椅子付属品 介護給付:171002 予防給付:671002

ベッド・  
ベッド  
付属品

### オアシスポジティブ(自走・介助)

松永製作所


スイングアウト&エレベーター付。バックサポートの上部が、前方へ折れ曲がり  
バックサポート全体で活動的な前向きな姿勢をキープします。

座と背シートの角度はそのまま後方に倒れるティルト機能に加え  
背シートの角度調整も可能なリクライニング機能付き

非課税



自走型

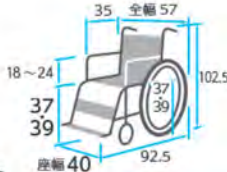


※前座高・後座高・ひじ高は  
クッションの厚み含まず



介助型

全幅53cmのコンパクト設計

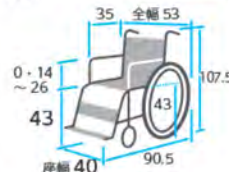

※前座高・後座高・ひじ高は  
クッションの厚み含まず

重さ  
26.2  
kg

重さ  
25.4  
kg

商品名	商品番号	商品コード
OS-11TRSP S&E	21-5725-0	00066-Z00054
前輪:5インチ 後輪:18インチ ティルト角度:0°~25° リクライニング角度:90°~115° クッション厚さ:5cm		
折りたたみ:全幅35×全高91.5×全長92.5cm 耐荷重:75kg		
ご利用者 負担額 (1割)	(2割) 円 (3割) 円	月額レンタル料金 円

商品名	商品番号	商品コード
OS-12TRSP S&E	21-5724-0	00066-Z00011
前輪:6インチ 後輪:12インチ ティルト角度:0°~25° リクライニング角度:90°~115° クッション厚さ:5cm		
折りたたみ:全幅32×全高95.5×全長90.5cm 耐荷重:75kg		
ご利用者 負担額 (1割)	(2割) 円 (3割) 円	月額レンタル料金 円

床ずれ  
防止用具

体位  
変換器

認知症  
老人徘徊  
感知機器

手すり

### ぴったりフィットくるーん KPFK-12

カワムラサイクル

座と背シートの角度はそのまま後方に倒れるティルト機能に  
加え、背シートの角度調整も可能なリクライニング機能付き

非課税



#### 【ぴったりフィット機構】

＜国内特許取得済＞バックサ  
ポートを「開す・起こす」の動作  
を繰り返しても、お尻がズレに  
く、安定した座位が保てます。



#### 【スキーズベルト】

背中の張り調節部に伸縮する部  
分を設けました。  
この部分の「スキマ」の空き方  
を見ながらベルトの張りなおし  
をすることで、従来より簡単に  
調節することができます。



※前座高・後座高・ひじ高は  
クッションの厚み含まず

重さ  
21.5  
kg

商品名	商品番号	商品コード
KPFK-12	21-6524-0	00160-000250
前輪:6インチ 後輪:12インチ 折りたたみ:全幅35×全高77×全長72cm クッション厚さ:7cm		
ご利用者 負担額 (1割)	(2割) 円 (3割) 円	月額レンタル料金 円

歩行  
補助杖

歩行器

車椅子・  
車椅子  
付属品

スロープ

移動用  
リフト・  
つり具

### フルリクライニング車いす RJ-360

いづら

座と背シートの角度はそのまま後方に倒れるティルト機能に加え、  
背シートの角度調整も可能なリクライニング機能付き

非課税



優れた座位保持効果を発揮する、独自のチルト&リク  
ライニング機能により、体重をやさしく支え、長時間座つ  
ても快適に過ごせます。



(フルフラット状態)



※前座高・後座高・ひじ高は  
クッションの厚み含まず

重さ  
36.0  
kg

商品名	商品番号	商品コード
RJ-360	21-5406-0	00084-000086
前輪:6インチ 後輪:16インチ ティルト角度:6.5°~19.5° リクライニング角度:10.5°~165° 耐荷重:100kg		
ご利用者 負担額 (1割)	(2割) 円 (3割) 円	月額レンタル料金 円

介護保険  
購入  
対象品

販売品

情報



## 車椅子・車椅子付属品

ベッド・  
ベッド  
付属品床ずれ  
防止用具

## 延長用レバー MS-131

※取り付けに関しては付属品  
適合表をご参照ください。

ミキ



長 短

ブレーキレバーの長さを延長することができます。

商品名	商品番号	商品コード
延長用レバー (長)	29-5303-1	00122-000426

ブレーキレバーを10cm延長

ご利用者 負担額 (1割)	(2割) 円	(3割) 円	月額レンタル料金 円

商品名	商品番号	商品コード
延長用レバー (短)	29-5304-1	00122-000425

ブレーキレバーを5cm延長

ご利用者 負担額 (1割)	(2割) 円	(3割) 円	月額レンタル料金 円

体位  
変換器認知症  
老人徘徊  
感知機器

手すり

歩行  
補助杖

## 杖入れ/杖置き

● ミキ 杖入れ (1本用)



● カワムラサイクル 杖置き



ミキ

商品名	商品番号	商品コード
杖入れ (1本用) MS-132	29-5999-1	00122-000252

ご利用者負担額 (1割) (2割) 円 (3割) 円 月額レンタル料金 円

カワムラサイクル

商品名	商品番号	商品コード
杖置き KY40276	29-8333-1	00160-000169

ご利用者負担額 (1割) (2割) 円 (3割) 円 月額レンタル料金 円

歩行者

車椅子・  
車椅子  
付属品

スロープ

移動用  
リフト・  
つり具介護保険  
購入  
対象品

販売品

情報

## ボンベ架/延長ティッピングバー

※取り付けに関しては付属品  
適合表をご参照ください。

ミキ

ボンベ架



延長ティッピングバー

酸素ボンベを携帯する際に使用します。  
ベルトによって大きさの調整が可能です。

●ボンベ架取り付けには「延長ティッピングバー MS-138」の取付が必要となります。

商品名	商品番号	商品コード
ボンベ架 MS-134	29-5918-1	00122-000214

ご利用者負担額 (1割) (2割) 円 (3割) 円 月額レンタル料金 円

商品名	商品番号	商品コード
延長ティッピングバー MS-138	29-6057-1	00122-000387

ご利用者負担額 (1割) (2割) 円 (3割) 円 月額レンタル料金 円

## ブレーキ延長棒

※取り付けに関しては付属品  
適合表をご参照ください。

日進医療器

商品名	商品番号	商品コード
+18cm	29-0213-1	00175-Z00024

ご利用者負担額 (1割) (2割) 円 (3割) 円 月額レンタル料金 円

松永製作所

商品名	商品番号	商品コード
+5cm	29-5110-1	00066-000298
+10cm	29-5111-1	00066-000298

ご利用者負担額 (1割) (2割) 円 (3割) 円 月額レンタル料金 円

カワムラサイクル

商品名	商品番号	商品コード
+10cm	29-7584-1	00160-000170

ご利用者負担額 (1割) (2割) 円 (3割) 円 月額レンタル料金 円

※取り付けに関しては付属品  
適合表をご参照ください。

● 松永製作所 杖入れ (大)



● 松永製作所 杖入れ (小)



松永製作所 (NEXT専用オプション)

商品名	商品番号	商品コード
杖入れ (大) X-WC92-010	29-8337-1	00066-000344

ご利用者負担額 (1割) (2割) 円 (3割) 円 月額レンタル料金 円

松永製作所

商品名	商品番号	商品コード
杖入れ (小) PO-09C	29-0150-1	00066-000212

ご利用者負担額 (1割) (2割) 円 (3割) 円 月額レンタル料金 円

## NEXT専用 酸素ボンベ架/転倒防止キャスト付

※取り付けに関しては付属品  
適合表をご参照ください。

松永製作所

酸素ボンベ架



転倒防止キャスト付



●後方への転倒のおそれがある場合は転倒防止の取り付けをおすすめします。

商品名	商品番号	商品コード
酸素ボンベ架 X-WC91-001	29-8338-1	00066-000345

ご利用者負担額 (1割) (2割) 円 (3割) 円 月額レンタル料金 円

商品名	商品番号	商品コード
転倒防止キャスト付	29-8339-1	00066-000356

ご利用者負担額 (1割) (2割) 円 (3割) 円 月額レンタル料金 円

税込価格で表記しています。(非課税 ※非課税と表記のない商品に限る) 単位:cm

サービスコード/車椅子 介護給付:171001 予防給付:671001 /車椅子付属品 介護給付:171002 予防給付:671002

ベッド・  
ベッド  
付属品

### マルチエルゴエレベータィング

ミキ



装着例:TRC-2

エレベータィング角度可変域	12~71° 無段階
フットサポート角度可変域	±45°
フットサポート位置可変域	前後40mm
フットサポート幅調整域	0~40mm
レッグサポート位置可変域	10mmピッチ4段階

ご利用者の体型や、脚部の状態に合わせて、左右独立して自在にフットサポートの位置を変えられます。フットサポートとレッグサポートの細かい調整が可能です。

商品名	商品番号	商品コード
マルチエルゴエレベータィング	29-6338-1	00122-000436
左右別々に脚部の角度を無段階(12~71度)調整、ステップ(足台)角度調整(90度~120度)		
ご利用者 (1割) 負担額	(2割) 円	月額レンタル料金 円
	(3割) 円	円

重さ  
2.53kg

床ずれ  
防止用具


体位  
変換器

認知症  
老人徘徊  
感知機器

手すり

### テーブル(大) 横差し前後スライド式

ミキ

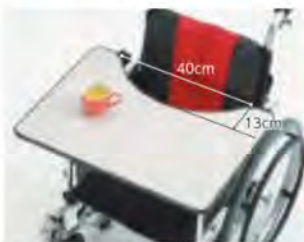

※取り付けに関しては付属品  
適合表をご参照ください。

※使用イメージ

横差し金具・受け金具  
前後にスライドが可能です。

車椅子に座ったまま読書や軽作業ができます。テーブルが前後にスライドします。抗菌仕様。

商品名	商品番号	商品コード
テーブル(大) 横差し前後スライド式	29-0370-1	00122-000216
サイズ:幅60×奥行45×厚さ1.5cm 重さ:2.5kg		
ご利用者 (1割) 負担額	(2割) 円	月額レンタル料金 円
	(3割) 円	円

重さ  
2.5kg

### エルゴエレベータィングⅡ

ミキ



※取り付けに関しては付属品  
適合表をご参照ください。

ご利用者の体型や、脚部の状態に合わせて自在にフットサポートの位置を変えられます。ステップに足を乗せたまま左右別々に脚部を上げ下げすることができます。

商品名	商品番号	商品コード
エルゴエレベータィングⅡ	29-6014-1	00122-000383
左右別々に脚部の角度を無段階(12~71度)調整、ステップ(足台)角度調整(90度~120度)		
ご利用者 (1割) 負担額	(2割) 円	月額レンタル料金 円
	(3割) 円	円

重さ  
2.2kg

歩行  
補助杖

歩行器

車椅子・  
車椅子  
付属品

スロープ

移動用  
リフト・  
つり具

### スマートヘッドサポート MS-0009

ミキ



枕位置調整は前後左右、角度それぞれ  
独立して行えます。



背パイプを挟んで取付します。穴あけ不要。



取付金具



幅のスライド調整により  
座幅30~44cmの車椅子に  
取り付けできます。※1

装着例: BAL-1  
(写真左:使用時、  
写真右:折りたたみ時)

車椅子の背パイプに簡単に着脱ができます。車椅子の背角度、座幅、利用者の姿勢に合わせて、枕の上下・左右・前後の位置、および角度をそれぞれ独立して調整できます

商品名	商品番号	商品コード
MS-0009	29-6760-1	00122-000461
対応可能な座幅(カタログ値): 最小30/最大44cm ※1 一部特殊フレーム除く		
ご利用者 (1割) 負担額	(2割) 円	月額レンタル料金 円
	(3割) 円	円

重さ  
2.0kg

介護保険  
購入  
対象品

販売品

情報





# 車椅子・車椅子付属品

車椅子付属品適合表

タイプ	商品コード	商品名称	付属品適合																		
			29-5303-1 延長用 レバー MS-131 (板) ミキ	29-5304-1 延長用 レバー MS-131 (板) ミキ	29-0213-1 ブレーキ 延長棒 +18cm 日産医療福祉 取込製作所	29-5110-1 ブレーキ 延長棒 +5cm 取込製作所	29-5111-1 ブレーキ 延長棒 +10cm 取込製作所	29-7584-1 ブレーキ 延長棒 +10cm カウムラ サイズル	29-5999-1 杖入れ MS-132 ミキ	29-8333-1 杖置き KY40276 カウムラ サイズル	29-8337-1 杖入れ (大) WCSQ010 取込製作所	29-0150-1 杖入れ (小) PO-90C 取込製作所	29-5916-1 ボンベ袋 MS-134 ミキ	29-6057-1 延長用 ピンパー MS-138 ミキ	29-8338-1 NEXT 専用 車掌のペグ WCS91001 取込製作所	29-8339-1 NEXT 専用 転倒防止 キタスタフ 取込製作所	29-6336-1 マルチ エルゴ エレベ ーティ ンク ミキ	29-0370-1 テーブル MS-151 ミキ	29-6014-1 エルゴ エレベ ーティ ンク Ⅱ ミキ	29-5760-1 スマート ヘッド サポート MS-0008 ミキ	
体位 変換器	21-6821-0	ケアフィットウイング (自走)							○				○					○		○	
	21-6183-0	ケアフィットプラス(自走)	○	○						○			○						○		○
認知症 老人徘徊 感知機器	21-5247-0	ケアアジャスト(自走) MC-KM001	○	○									○						○		
	21-6774-0	イージーフィット(自走) MEF-22											○								○
手すり	21-6776-0	イージーフィット(自走) MEF-20											○								○
	21-5300-0	MM-フィット(自走) MM-Fit Hi22	○	○						○			○					○	※4		○
歩行 補助杖	21-5301-0	MM-フィット(自走) MM-Fit Hi20	○	○						○			○					○	※4		○
	21-5303-0	MM-フィット(自走) MM-Fit Lo20	○	○						○			○					○	※4		○
歩行器	21-6717-0	カルタ自走CRT-1 (ハイポリマータイヤ)																			
	21-6721-0	カルティマ自走CRT-5 (ハイポリマータイヤ)																			
	21-6723-0	カルティマ自走CRT-7 (ハイポリマータイヤ)																			
車椅子・ 車椅子 付属品	21-5755-0	BAL-1(自走)	○	○						○			○	○					○		○
	21-5863-0	BAL-3(自走)	○	○						○			○					○	※9	○	○
	21-5637-0	スキット4(自走) SKT-4	○	○						○			○					○		○	○
	21-6191-0	とまっティ(自走) MBY-41B	○	○						○			○	○					○		○
	21-5587-0	RX-1 Lo(自走)	○	○									○								○
移動用 リフト・ つり具	21-6217-0	ふわりす(KF)シリーズ(自走) (エア軽量タイヤ仕様)							○		○										
	21-6513-0	ふわりす+ (自走) (ソフトタイヤ仕様)							○		○										
	21-5953-0	ネクストコア(自走) NEXT-11B				○	○								○	○					
介護保険 購入 対象品	21-6041-0	ネクストコア・マルチ(自走) NEXT-31B				○	○								○	○					
	21-6039-0	ネクストコア・アジャスト(自走) NEXT-51B				○	○								○	○					
販売品	21-5355-0	キックル			○																
	21-6822-0	ケアフィットウイング (介助)								○			○						○		○
情報	21-6385-0	ケアフィットプラス(介助)	○	○						○			○						○		○
	21-5246-0	ケアアジャスト(介助) MC-KM002	○	○									○							○	
	21-6775-0	イージーフィット(介助) MEF-16												○							○
	21-6777-0	イージーフィット(介助) MEF-14												○							○
	21-5302-0	MM-フィット(介助) MM-Fit Hi16	○	○						○			○					○	※4		○
	21-5304-0	MM-フィット(介助) MM-Fit Lo16	○	○						○			○						○	※4	○

税込価格で表記しています。(非課税 ※非課税と表記のない商品に限る) 単位:cm

サービスコード/車椅子 介護給付:171001 予防給付:671001/車椅子付属品 介護給付:171002 予防給付:671002

ベッド・  
ベッド  
付属品

## 車椅子付属品適合表

タイプ	商品コード	商品名称	付属品適合																	
			29-5303-1	29-5304-1	29-0213-1	29-5110-1	29-5111-1	29-7504-1	29-5999-1	29-8333-1	29-8337-1	29-0150-1	29-5918-1	29-4057-1	29-8338-1	29-8339-1	29-6338-1	29-0370-1	29-6014-1	29-4760-1
			経路用 レバー MS-131 (黄)	経路用 レバー MS-131 (黄)	ブレーキ 延長棒 +18cm	ブレーキ 延長棒 +5cm	ブレーキ 延長棒 +10cm	ブレーキ 延長棒 +10cm	カウル MS-132	拡張 KY40276	投入 穴 KWL32010	投入 穴 PU-90C	ポンペ MS-134	延長 ピン MS-138	NEXT 専用 SW-900	NEXT 専用 転倒 防止 キヤスタ 付	マルチ エルゴ エレベ ー ティン グ	テー ブル MS-151	エル ゴ エレ ベ ー ティ ン グ II	スマ ート ヘッ ド サ ポ ー ト MS-009
介 助	21-67180	カルッタ介助CRT-2 (ハイポリマータイヤ)																		
	21-67220	カルティマ介助CRT-6 (ハイポリマータイヤ)																		
	21-67240	カルティマ介助CRT-8 (ハイポリマータイヤ)																		
	21-57560	BAL-2 (介助)	○	○					○				○	○			○		○	
	21-58640	BAL-4 (介助)	○	○					○				○	○		○	○	○	○	
	21-52960	スキット1(介助) SKT-1	○	○					○					○					○	
	21-52790	スキット2(介助) SKT-2	○	○					○					○	○		○	○	○	
	21-55880	RXC-1 Lo(介助)	○	○										○					○	
	21-62180	ふわりオ(KF)シリーズ(介助) (エア軽量タイヤ仕様)							○		○									
	21-65150	ふわりオ+(介助) (ソフトタイヤ仕様)							○		○									
	21-59540	ネクストコア(介助) NEXT-21B				○	○				○				○	○				
	21-60420	ネクストコア・マルチ(介助) NEXT-41B				○	○				○				○	○				
	21-60400	ネクストコア・アジャスト (介助)NEXT-61B				○	○				○				○	○				
6 輪 車	21-56780	スキット5(屋内6輪車) SKT-5																	○	
テ ィ ル ト ・ リ フ ラ イ ニ ン グ	21-67650	TRC-3DX																		
	21-55780	TRC-2	○	○													○			
	21-65240	ぴったりフィットくるーん																		
	21-68580	マイクミニ30 スイングアウトエレベーター・リフトアップ用																		
	21-57240	オアシスポジティブ OS-12TRSP(リフトアップ・リフトアップ付)				○	○													
	21-60070	ネットィem																		
	21-53050	リクライニング型車いす(介助) MW-14				○	○													
電 動 車 ア シ ス ト	25-59450	アシストホイールライト																		
	25-59090	ハイパワーアシストホイール100 (自走) NAW-22C-5D-HP-G-UT				○	○					○								
	25-59040	ハイパワーアシストホイール100 (介助) NAW-16C-DT-HP-G-UT				○	○					○								
	25-59060	軽量電動車いす JWX-1M	○	○															○	

床ずれ  
防止用具体位  
変換器認知症  
老人徘徊  
感知機器

手すり

歩行  
補助杖

歩行者

車椅子・  
車椅子  
付属品

スロープ

移動用  
リフト・  
つり具介護保険  
購入  
対象品

販売品

情報

- ※1…取付けには「延長ティッピングバー MS-138」の併用が必須となります。  
 ※2…取付け側のひじ当ては跳ね上げができなくなります。  
 ※3…取付け時にポンペ架台付属の固定用ステーをサイドガードの直ぐ下に取付ける必要があります。  
 ※4…ひじ当てを一番下まで下げて使用することができなくなります。  
 ※5…取付け時にスマートヘッドサポート付属の受金具Bの下側の穴を使用する必要があります。  
 ※6…後方への転倒のおそれがある場合は転倒防止の取り付けをおすすめします。  
 ※7…延長棒先端の握りゴムがネクストコアと同様の形状・色(黄)となりますが、取付けは可能です。  
 ※8…バッテリーボックスに干渉する為、介助者から見て右側には取付けできません。  
 ※9…2019年1月以降の車体は、マルチエルゴエレベーターが適合となります。  
 ※10…脚部SW時に当たります。



# 車椅子・車椅子付属品

ベッド・  
ベッド  
付属品

床ずれ  
防止用具

体位  
変換器

認知症  
老人徘徊  
感知機器

手すり

歩行  
補助杖

歩行者

車椅子・  
車椅子  
付属品

スロープ

移動用  
リフト・  
つり具

介護保険  
購入  
対象品

販売品

情報

## アシストホイールをこんな場面で!



1 おとしよりのご夫婦に…

2 芝生や砂利道などで…

3 デイサービスの送迎で…

4 急勾配のスロープで…



- 上り坂はラクラク電動アシスト
- 芝生、砂利道もラクラクスムーズ
- 下り坂は自動的にブレーキ
- 手動車いすと同様の簡単操作

## アシストホイールライト

気軽に利用できる“電動アシスト車椅子”です

非課税



ナブテスコ

登り坂ではモーターがらくらくアシスト、下り坂では自動ブレーキで安心です。操作はシンプルで簡単です。電源を入れる以外にボタンやダイヤル設定は不要です。



センサ内蔵グリップで介護者の負担を自動検知。電源を入れたら、あとは手動車いすと同様に操作するだけです。

重さ  
18.4  
kg  
(バッテリー含む)



### お年寄りのご夫婦に…

これからますます増えるお年寄り同士の介護。車椅子に乗っている方も「重いのに申し訳ない」と遠慮しがちになってしまいます。アシストホイールなら外出の機会も増えて、ますます元気に!



### 芝生や砂利道などで…

外に散歩に出かけると意外と多いのが芝生や未舗装の道路。普通の手動車椅子なら、避けてしまいがちのこんな場所もアシストホイールなら安心・ラクラク!




### デイサービスの送迎で…

福祉車両のスロープは意外ときつくて乗り降りが大変。アシストホイールなら、急勾配のスロープでも安心・ラクラク!



### 急勾配のスロープで…

スロープを付けたのは良いものの、勾配が急すぎて押すのが大変という方に。アシストホイールなら急勾配のスロープでも安心・ラクラク!

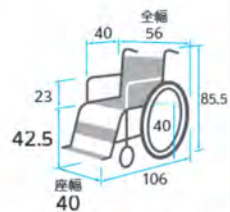

商品名	商品番号	商品コード
アシストホイールライト	25-5945-0	00025-000023
前輪: 6インチ 後輪: 16インチ 連続走行距離: 約 7km 登坂角度: 10° 耐荷重: 75kg		
折りたたみサイズ: 全幅 33.5 × 全高 68 × 全長 106cm 満充電までの最大所要時間: 130分		
ご利用者 負担額 (1割)	(2割) 円 (3割) 円	円 月額レンタル料金 円

税込価格で表記しています。(非課税 ※非課税と表記のない商品に限る) 単位:cm

サービスコード/車椅子 介護給付:171001 予防給付:671001/車椅子付属品 介護給付:171002 予防給付:671002

ベッド・  
ベッド  
付属品

## マイピア BT41B

アテックス



毎日の移動手段に。長距離や大きめの荷物、坂道でも安心と安全の充実機能。



※製品の色や仕様は変更となる場合があります。

商品名	商品番号	商品コード
BT41B	25-5973-0	00228-000026
前輪:3.00-4 後輪:3.50-5		
連続走行距離:30km 最高前進速度:6km/h		
満充電までの最大所要時間:11~13時間 重さ(バッテリー含):97kg		
ご利用者負担額 (1割)	(2割) 円	月額レンタル料金 円
負担額	(3割) 円	円

重さ  
約97kg  
(バッテリー含む)

床ずれ  
防止用具

体位  
変換器

認知症  
老人徘徊  
感知機器

手すり

## WHILL Model CK2

WHILL



誰でも簡単に運転できる操作性と、行く場所を選ばない小回り性能、パワフルな走行性で安心して出かけられます。



### 小回り性能




スーパーや病院など、電動カートでは入れない場所でも、小回り機能でらくらく移動



アームの跳ね上げで前から横からも簡単に降り。フットサポートの上に立っても転倒しません。

### コントローラー

片手で簡単に操作。1~4段階のスピード調整、電源オンオフも片手でできます。手を離すと坂道でも自動でブレーキがかかります。コントローラーは左右どちらにも付替え可能で利き手を選びません。

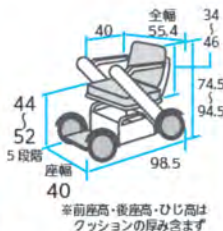

商品名	商品番号	商品コード
WHILL Model CK2	25-5992-0	01520-000028
走行距離:約18km 最速速度:6km/h 充電時間:5時間		
前輪:10.1インチ 後輪:10.4インチ		
ご利用者負担額 (1割)	(2割) 円	月額レンタル料金 円
負担額	(3割) 円	円

重さ  
約52kg

### パワフルな走行性

特別に開発された前輪と高出力のモーターで、裁断5cmの段差乗り換えが可能。



左右のモーターを適切に制御することで、横に傾斜した道でもまっすぐ走ることができます。



後輪のサスペンションにより、でこぼこ道や段差乗り越えの衝撃を吸収。長時間走ってもストレスを感じません。

歩行  
補助杖

歩行器

車椅子・  
車椅子  
付属品

スロープ

移動用  
リフト・  
つり具

介護保険  
購入  
対象品

販売品

情報



# 車椅子・車椅子付属品

ベッド・  
ベッド  
付属品



床ずれ  
防止用具

## アウルREHA (リハ) レギュラー/ハイ OWL21/22-BK1-4040

加地 「座る」を変える体圧・流動・分散。

- 衝撃を吸収する  
弾力性。
- 圧力を分散する  
柔軟性。
- ズレに寄り添う  
流動性。

EXGEL®

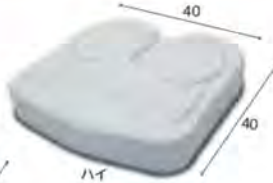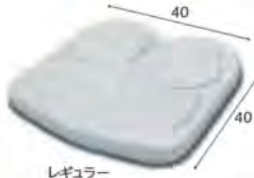

※付属カバーを外した状態

高さ 4 cm 重さ 約1.2 kg  
高さ 8 cm 重さ 約1.4 kg  
レギュラータイプ ハイタイプ



体位  
変換器

認知症  
老人徘徊  
感知機器

手すり

圧分散と肌のツツパリに対応し、薄さと足つき性を求める方に。

商品名	商品番号	商品コード
アウルリハレギュラー	29-6999-1	00540-000028
ご利用者 負担額 (1割)	(2割) 円 (3割)	円 月額レンタル料金 円

さらに坐骨周辺の沈み込み量を確保し、より減圧効果を求める方に。

商品名	商品番号	商品コード
アウルリハハイ	29-7000-1	00540-000029
ご利用者 負担額 (1割)	(2割) 円 (3割)	円 月額レンタル料金 円

歩行  
補助杖

## アウルREHA 3D

加地

- 衝撃を吸収する  
弾力性。
- 圧力を分散する  
柔軟性。
- ズレに寄り添う  
流動性。

「座る」を変える体圧・流動・分散。


EXGEL®



歩行者

●3Dジャスト

高さ 8 cm 重さ 約1.5 kg

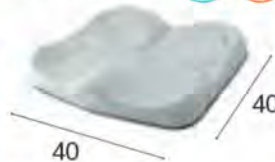

●3Dレギュラー

高さ 7.5 cm 重さ 約1.7 kg



●3Dハイ

高さ 11 cm 重さ 約1.9 kg



※写真は付属カバーを外した状態です。

最も圧力がかかる坐骨部付近を効果的に減圧します。  
ハイタイプは坐骨部の沈み込み量を確保した厚手タイプです。

- 自力での体幹保持が困難な方
- 大腿部の支持が必要な方
- 前ずれしてしまう方
- 座位が安定せず長時間座ってられない方

商品名	商品番号	商品コード
3Dジャスト	29-7587-1	00540-000055
ご利用者 負担額 (1割)	(2割) 円 (3割)	円 月額レンタル料金 円

サイズ：幅40×奥行40×高さ8cm

商品名	商品番号	商品コード
3Dレギュラー	29-6844-1	00540-000030
サイズ：幅40×奥行40×高さ7.5 (着座面5.3) cm		
商品名	商品番号	商品コード
3Dハイ	29-6848-1	00540-000031
サイズ：幅40×奥行40×高さ11 (着座面6.5) cm		
材質/本体：ウレタン合成革 素材：エクスジェル、ウレタンフォーム カバー：ポリエステル・ウレタンフォーム・ウレタンフィルム		
ご利用者 負担額 (1割)	(2割) 円 (3割)	円 月額レンタル料金 円

スロープ

移動用  
リフト・  
つり具

介護保険  
購入  
対象品

## バッククッション (ハイ・ロー) BAC-01/02-BK

加地 「座る」を変える体圧・流動・分散。

高さ 約0.5 kg 高さ 約1.1 kg  
ロー ハイ

EXGEL®



ロータイプはおしり後部の隙間と両側の支持により適切な体幹および座位安定に。  
ハイタイプは円背傾向が強く更に体側の支持が必要な方に。

商品名	商品番号	商品コード
ロータイプ	29-7141-1	00540-000034
ご利用者 負担額 (1割)	(2割) 円 (3割)	円 月額レンタル料金 円
商品名	商品番号	商品コード
ハイタイプ	29-7142-1	00540-000035
材質/本体：エクスジェル、ウレタンフォーム、ウレタン合成皮革、カバー：ポリエステル100%		
ご利用者 負担額 (1割)	(2割) 円 (3割)	円 月額レンタル料金 円

販売品

情報

税込価格で表記しています。(非課税 ※非課税 と表記のない商品に限る) 単位:cm


サービスコード/車椅子 介護給付:171001 予防給付:671001/車椅子付属品 介護給付:171002 予防給付:671002

ベッド・  
ベッド  
付属品

## エルダークッション

アイ・ソネックス

高さ 7.8 cm 重さ 0.93 kg

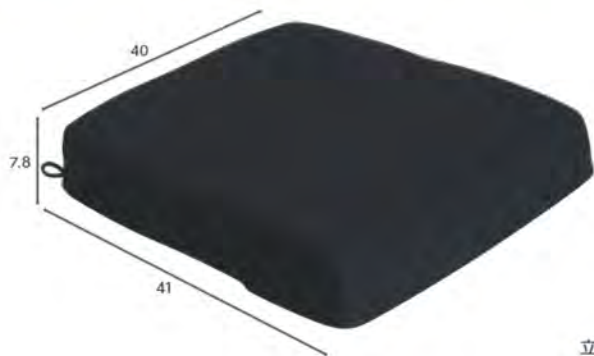

カバーにはポケットがあり、冊子を入れることで座面を安定させます。

立体形状で、前すべりの防止や姿勢の安定がはかれます。

商品名	商品番号	商品コード
エルダークッション	29-5972-1	00149-000020
ご利用者負担額 (1割)	(2割) 円	月額レンタル料金 円
	(3割) 円	円

床ずれ  
防止用具

体位  
変換器


認知症  
老人徘徊  
感知機器

手すり

## FC-コキュー君

アイ・ソネックス

高さ 8 cm 重さ 0.87 kg

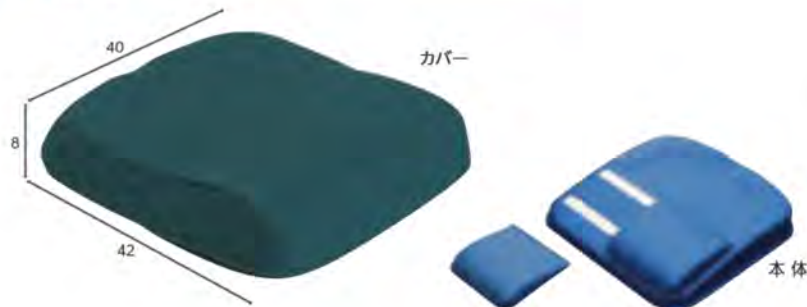

ももパットが外れるので足駆動の方にも。

手間いらずの自動調圧バルブのエアクション。接触圧の分散をはかります。

商品名	商品番号	商品コード
FC-コキュー君	29-5971-1	00149-000016
ご利用者負担額 (1割)	(2割) 円	月額レンタル料金 円
	(3割) 円	円

歩行  
補助杖

歩行器

車椅子・  
車椅子  
付属品

スロープ

移動用  
リフト・  
つり具

## FC-フィット(背・腰)

アイ・ソネックス

高さ 1 cm 重さ 0.53 kg FC-フィット(背)ロングパット2ヶ付  
高さ 0.5 cm 重さ 0.45 kg FC-フィット(腰)



FC-フィット(背)  
使用例

FC-フィット(背)ロングパット2ヶ付は長いパットで体幹をしっかり支えます。円背や斜め座りの方に。FC-フィット(腰)は骨盤を立ててしっかり支えます。骨盤が回旋、後傾している方に。

商品名	商品番号	商品コード
FC-フィット(背)ロングパット2ヶ付	29-6158-1	00149-000023
ご利用者負担額 (1割)	(2割) 円	月額レンタル料金 円
	(3割) 円	円
商品名	商品番号	商品コード
FC-フィット(腰)	29-6168-1	00149-000022
ご利用者負担額 (1割)	(2割) 円	月額レンタル料金 円
	(3割) 円	円

介護保険  
購入  
対象品

販売品

情報



# 車椅子・車椅子付属品

ベッド・  
ベッド  
付属品


床ずれ  
防止用具

## ブレイラハイブリッド・ケアシート BRHS-400BL

グローバル産業

高さ  
5.0  
cm

重さ  
0.85  
kg

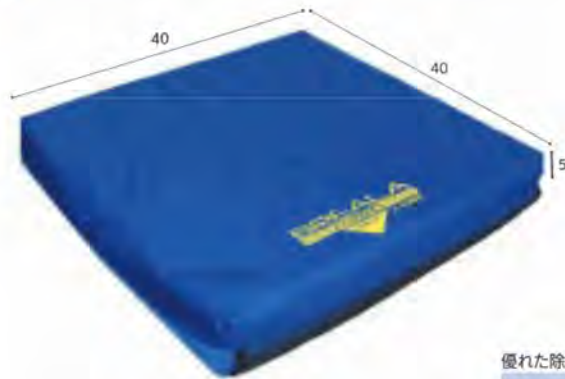

体位  
変換器

認知症  
老人徘徊  
感知機器

手すり

優れた除圧性能で床ずれを防止。透湿防水面と通気面の両面仕様で使い易い。

商品名	商品番号	商品コード
ブレイラハイブリッドケアシート	29-6226-1	01149-000014
ご利用者 負担額 (1割)	(2割) 円	月額レンタル料金 (3割) 円

歩行  
補助杖

## ベスポジェルクッション


ケーブ

高さ  
1.9  
kg

旧タイプ  
1.6kg

歩行器

車椅子・  
車椅子  
付属品

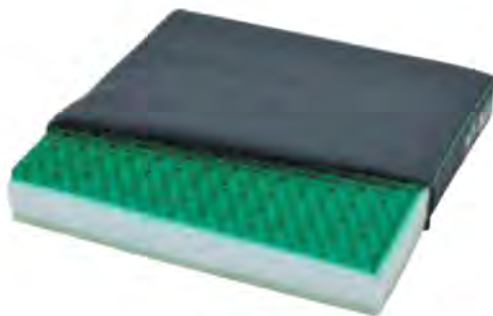

新タイプ



前後を変えることで、活動補助（足こぎ）と姿勢保持の2種類の用途に対応する体圧分散クッションです。

商品名	商品番号	商品コード
ベスポジェルクッション	29-6516-1	00206-000072
サイズ：幅40×奥行40×厚さ6.5cm 材質/本体：ポリウレタンジェル、ウレタンフォーム		
カバー：上面：ポリエステル100%ポリウレタンフィルムラミネート加工布（防水・制菌・吸湿速乾） 下面：ターポリン布（すべり止め加工、防水）		
ご利用者 負担額 (1割)	(2割) 円	月額レンタル料金 (3割) 円

スロープ


移動用  
リフト・  
つり具

## デュオジェルクッション

ケーブ

座位保持が困難で仙骨座りや骨盤後傾を起こしやすい場合も、2種類のジェルで安定した姿勢をサポートします。

U字構造

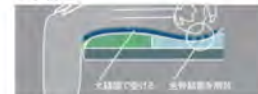

高さ  
7.5  
cm

重さ  
1.7  
kg

左右の大腿部の裏側で体重を受けるU字構造により、坐骨結節に集中する圧力を解放します。左右の体圧分布の偏りがなく、バランスよく身体を支え、優れた体圧分散効果が得られます。

専用カバー




伸縮性に優れた素材を使用し、張力を回避。内部のジェルやウレタンフォーム本来の効果を発揮させます。透湿性もあるので、ムレなどによる湿潤も予防します。

商品名	商品番号	商品コード
デュオジェルクッション	29-5922-1	00206-000048
材質/本体：シリコンジェル+ウレタンフォーム		
カバー：上面 ポリエステル100%（防水・伸縮） 下面 ターポリン布（すべり止め加工・防水・防炎）		
ご利用者 負担額 (1割)	(2割) 円	月額レンタル料金 (3割) 円

販売品

情報

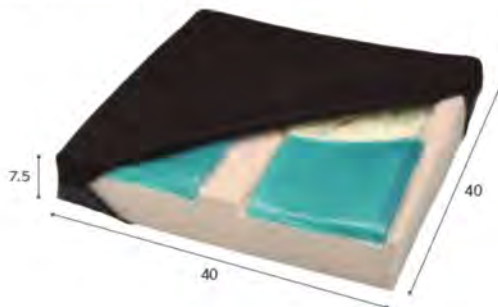

税込価格で表記しています。(非課税 ※非課税と表記のない商品に限る) 単位:cm

サービスコード/車椅子 介護給付:171001 予防給付:671001/車椅子付属品 介護給付:171002 予防給付:671002


ベッド・  
ベッド  
付属品

### アルファクッション 撥水・防水カバータイプ

タイカ

撥水・防水・制菌加工のカバーです。  
尾骨・坐骨をしっかり支え、車椅子の生活を楽にします。

高さ  
6  
cm  
重さ  
0.6  
kg

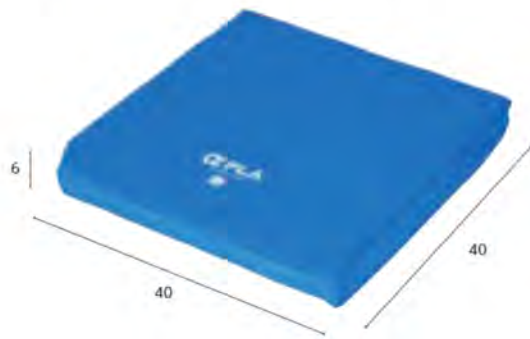

<特長>

- 3層のゲルサンド構造がお尻をしっかり包み込み、安定感のある座り心地を実現します。
- 左右の坐骨をしっかりサポート、仙骨座り(前ずれ)させない。
- スリングシート上でも滑らない裏面滑り止め加工付き。



撥水カバー  
専用カバーは撥水性が高く、失禁などによる汚染を防ぎます。

商品名	商品番号	商品コード
アルファクッション 撥水・防水カバータイプ	29-6552-1	00563-000017
サイズ: 幅40×長さ40×高さ6cm 重さ: 0.6kg		
材質/素材: アルファゲル, クレタフォーム, カバー: 天童・機織(国) ポリエステル(国) ポリウレタン 底面: ポリエステル, タグメッシュ		
ご利用者負担額 (1割)	(2割) 円	月額レンタル料金 円
	(3割) 円	円

床ずれ  
防止用具


体位  
変換器

認知症  
老人徘徊  
感知機器

手すり

### アルファラフクッション 撥水・防水カバータイプ

タイカ

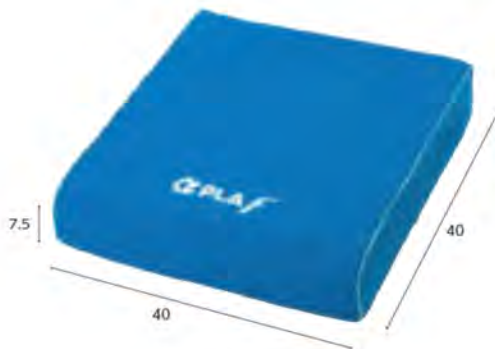

高さ  
7.5  
cm  
重さ  
0.6  
kg

構造



手入れ簡単なカバー



高い体圧分散性能と座位姿勢の安定を考えた高性能車椅子用クッションです。

商品名	商品番号	商品コード
アルファラフクッション 撥水・防水カバータイプ	29-8599-1	00563-000124
サイズ: 幅40×長さ40×高さ7.5cm 重さ: 0.6kg		
材質/素材: ポリエステル, クレタフォーム, カバー: 天童・機織(国) ポリエステル(国) ポリウレタン 底面: ポリエステル, タグメッシュ		
ご利用者負担額 (1割)	(2割) 円	月額レンタル料金 円
	(3割) 円	円

歩行  
補助杖

歩行器

車椅子・  
車椅子  
付属品

スロープ

移動用  
リフト・  
つり具

### アウルサポート バッククッション/シートクッション

加地



エクスジェルが圧迫軽減。座位バランスをサポートする背&座クッションです。

商品名	商品番号	商品コード
バッククッション	29-6192-1	00540-000015
サイズ: 幅48×奥行12×高さ36.5cm		
材質/素材: エクスジェル, クレタフォーム, クレタ合繊維, ナイロン100%, 膨起エシレン, カバー: ポリエステル100%, クレタフォーム		
ご利用者負担額 (1割)	(2割) 円	月額レンタル料金 円
	(3割) 円	円
商品名	商品番号	商品コード
シートクッション	29-6193-1	00540-000016
サイズ: 幅40×奥行40×前/中/後: 7/5.5/5cm		
材質/素材: エクスジェル, クレタフォーム, 700メッシュ, ナイロン100%, カバー: ポリエステル100%, クレタフォーム, クレタフォーム		
ご利用者負担額 (1割)	(2割) 円	月額レンタル料金 円
	(3割) 円	円

介護保険  
購入  
対象品

販売品

情報